


KOIZUMI

家庭用

超音波ピーリング KBE-2730

保証書付

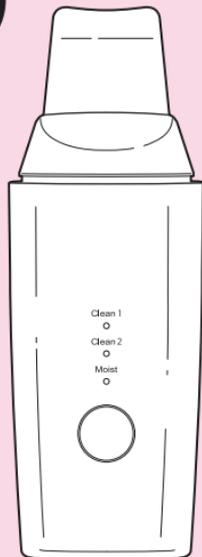

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

このたびはコイズミ 超音波ピーリングをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後も、大切に保管してください。

小泉成器株式会社

安全上のご注意

*ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

-  **危険** 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じるもの
-  **警告** 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの
-  **注意** 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示の例

-  〇記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
-  ●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

危険

- 下記のような医療用電子機器をお使いの方は絶対に使用しない。
 - ・ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器
 - ・人工心肺などの生命維持用医療用電子機器
 - ・心電計などの装着型の医療用電子機器医療用電子機器の誤作動をまねく恐れがあります。
- 高温になる場所（火やストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生する場所で使用したり放置したりしない。
室温 10℃～35℃の環境で使用・充電・保管してください。
発火・火災・破裂・故障の原因となります。
- 電子レンジや高压容器などの中に本体やUSBケーブルを入れない。
発火・火災・破裂・故障の原因となります。
- 火の中に投入したり、加熱しない。
発火・火災・破裂・故障の原因となります。
- 接続端子をショートさせない。接続端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させない。
火災・故障の原因となります。



警告



- 改造はしない。修理技術者以外の方は分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。



- 使用中痛みや不調を感じたときや、使用后肌に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談する。

事故や体調不良、肌のトラブルなどの原因となります。

- USBケーブルは必ずゆとりを持たせて使用する。

USBケーブルが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。



- USBケーブルは清潔にする。コネクタにほこりが付着している場合は拭き取る。

ショート・火災の原因となります。

- 市販のUSB-ACアダプターは必ず定格出力DC5V 1Aのものを使用する。また、USB-ACアダプターの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用する。

火災・感電の原因となります。



- 落としたり投げつけるなど強い衝撃を与えない。

破裂・発熱・発火・液漏れ・故障の原因となります。



警告

● 次のような方は、使用しない。

- ・心臓に障害のある人
 - ・急性疾患の人
 - ・有熱性疾患の人
 - ・血圧異常の人
 - ・感染性疾患の人
 - ・結核性疾患の人
 - ・悪性腫瘍の人
 - ・顔面神経痛の人
 - ・妊娠中の人
 - ・生理中の人
 - ・アトピー性皮膚炎の人
 - ・アレルギー体質の人
 - ・特に肌が敏感な人
 - ・血友病疾患の人
 - ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
 - ・飲酒や薬を服用中の人・過度の日焼け直後で赤くヒリヒリし、炎症を起こしている人
 - ・健康が特にすぐれない人、疲労が激しい人
 - ・化学繊維でかぶれた経験のある人
- 事故やトラブルの恐れがあります。



● 下記の部位には、使用しない。

- ・整形手術をした部位
 - ・眼球および上まぶた
 - ・傷口
 - ・顔面黒皮症
 - ・口の中など粘膜の部位
 - ・ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位・感覚、知覚障害を起こしている部位
 - ・皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部位
 - ・カユミやホテリ、物理的刺激による病的なシミのある部位
 - ・過度の日焼けで炎症を起こしている部位
 - ・化粧品などで皮膚炎を起こしている部位
- 事故や肌のトラブルの恐れがあります。

● 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。

事故・感電・けがの原因となります。

警告

- USBケーブルが傷んだり、接続端子の差し込みがゆるいときは使用しない。


感電・ショート・発火の原因となります。

- USBケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。

USBケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

- 本体にUSBケーブルを巻きつけない。また、USBケーブルを束ねたまま使用しない。

USBケーブルがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。

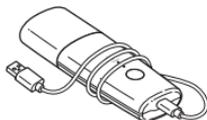

- 次のようなときは使用しない。

- ・ USBケーブルや本体が異常に熱い、または煙が出ている。
- ・ USBケーブルに深い傷がある。
- ・ USBケーブルが焦げている。
- ・ 異常な音やこげくさい臭いがする。

- 雷が鳴り出したら、USBケーブルに触れない。

落雷による感電の原因となります。

- 業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

連続過負荷による故障の恐れがあります。

警告



●専用のUSBケーブルで、他の商品を使用したり、充電したりしない。
また、専用のUSBケーブル以外は使用しない。
異常発熱による発火・ショートの原因となります。

●出力電圧がDC5V以外の機器につながらない。
火災・感電の原因となります。

●USBケーブルがよじれたままでは使用しない。
ショートして火花が出ることがあります。




●水をかけたり、水につけたりしない。
ショート・感電の原因となります。

●濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししたり、濡れた手で使用しない。
ショート・感電の原因となります。



●浴室などの水のかかる所や湿気の多い所で使用しない。また、水洗い掃除を絶対にしない。
感電・発火・ショートの原因となります。

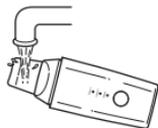

●使用時以外は必ず電源を切り、USB-ACアダプターをコンセントから抜いて、USBケーブルを接続端子から取り外す。
けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。



注意

- ご使用前に、スパチュラに破損がないか確認する。
肌を傷つける原因となります。
- USBケーブルを抜くときは、必ず先端のコネクタを持って引き抜く。
感電・ショートして発火することがあります。
- お手入れをするときは、必ず電源を切り、USBケーブルを取り外す。
感電やけがの原因となります。
- 使いはじめや敏感肌の方は使用時間を短めにして、お肌の様子を見ながら使用する。
事故や肌荒れなどのトラブルの原因となります。
- イヤリングやネックレスなどのアクセサリー、コンタクトレンズは、外して使用する。
事故やトラブルの原因となります。
- ひどい肌荒れや皮フ表面に凹凸がある場合またはうぶ毛やヒゲなどによって、まれに刺激を強く感じる場合があります。
その際には、その部位への使用を控える。
事故やトラブルの原因となります。
- スパチュラは肌の同一部位に留めず移動させて使用する。
肌のトラブルや体調不良の原因となります。
- ご使用のたびに、お手入れをする。
肌のトラブルの原因となります。





注意



- 乾いた肌への使用は絶対にしない。
肌のトラブルの原因となります。
- 肌に傷や炎症がある場合は絶対に使用しない。
肌のトラブルや痛みの原因となります。
- 脱毛・剃毛処理した当日は同部位への使用はしない。
腫れたり、赤みが出る恐れがあります。
- 規定時間以上の使用はしない。
肌のトラブルの原因となります。
- 化粧水や美容液は、水溶性のもの以外使用しない。また、防腐剤（パラベン・エタノールなど）や香料が含まれているものは使用しない。
肌のトラブルの原因となります。
- 家族や他人と共用しない。
感染・炎症の原因となります。
- 通電したまま放置しない。
事故・トラブルの原因となります。
- 顔のお手入れ以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。
事故やトラブルにつながる恐れがあります。
- スパチュラを肌以外の異物に触れさせない。
事故やトラブルにつながる恐れがあります。

注意



●お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。
ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。

●直射日光の当たる所で使用したり放置しない。
変形・変色・故障の原因となります。

●USBケーブルを取り付けたまま持ち運んだり、保管したりしない。
破損の原因となります。

●パソコンなどのUSB接続端子で、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しない。
パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因となる恐れがあります。

●パソコンなどの機器と接続した状態で、強い振動や衝撃を与えない。
接続したパソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因となります。




●浴室などの水のかかる所や湿気の多い所に保管しない。
絶縁劣化により感電することがあります。

パソコンなどに接続した場合のデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。


各部のなまえ

本体

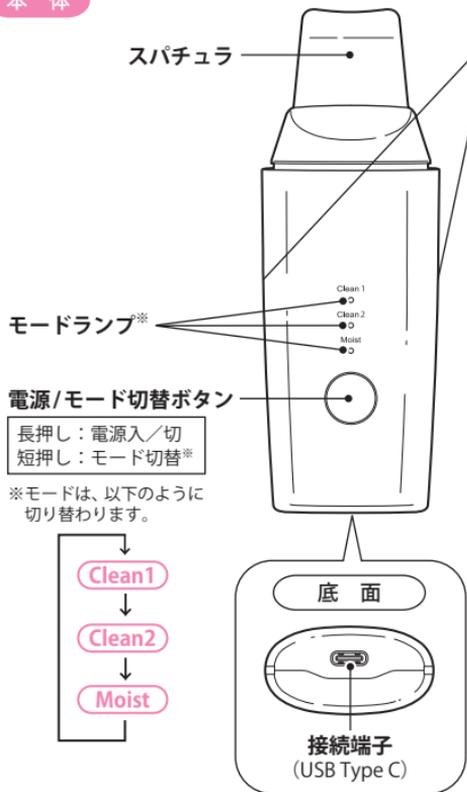

長押し：電源入/切
短押し：モード切替※

※モードは、以下のように切り替わります。

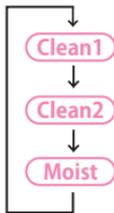


アース (側面)

この部分を素手で持って (触れて) 使用してください。 (Clean2モード、Moistモード時)




付属品

● USBケーブル

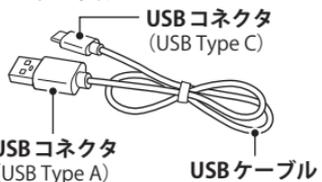

● ミラー付キャップ

※梱包時は本体に取り付けられています。

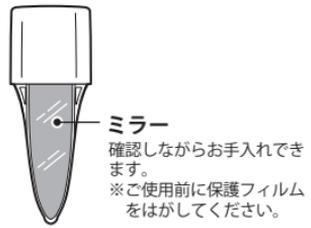

充電のしかた

- 初めて使用する場合は、必ず充電してください。
- 長期間放置しておくとう電圧が低下する場合がありますので、使い始めなどには充電してください。
- 充電は、市販または当社別売部品のUSB-ACアダプター (P. 27参照) をご使用ください。



警告

市販のUSB-ACアダプターは必ず定格出力DC5V 1Aのものを使用する。また、USB-ACアダプターの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用する。
火災・感電の原因となります。

- パソコンなどに接続しても充電できますが、環境によって正常に充電できない場合があります。

※パソコンなどに接続した場合のデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。



警告

専用のUSBケーブルで、他の商品を使用したり、充電したりしない。また、専用のUSBケーブル以外は使用しない。
異常発熱による発火・ショートの原因となります。

出力電圧がDC5V以外の機器につながらない。
火災・感電の原因となります。




注意

パソコンなどのUSB接続端子で、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しない。
パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因となる恐れがあります。

- 充電完了後、USBケーブルを取り外してご使用ください。

- 1 USBケーブルのUSBコネクタ (USB Type A) を市販または当社別売部品のUSB-ACアダプターのUSB接続端子に差し込みます。
- 2 USBケーブルのUSBコネクタ (USB Type C) を本体の接続端子に差し込みます。
- 3 USB-ACアダプターをコンセントに差し込みます。
 - ・すべてのモードランプが同時に点滅します。
 - ・充電が完了すると、モードランプが点灯します。

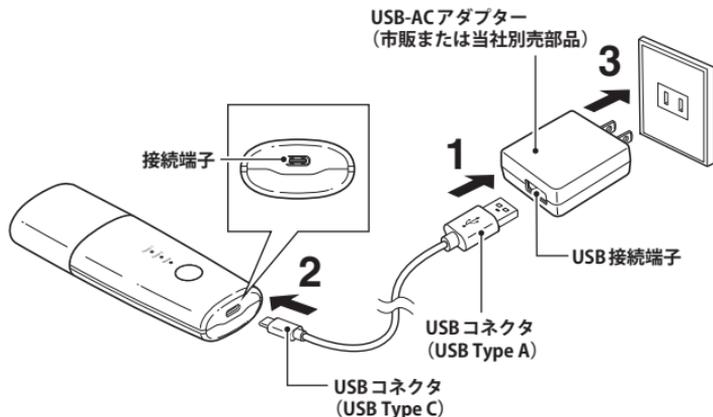

※充電中は、本体・USB-ACアダプターが多少熱くなりますが、異常ではありません。
※当社別売部品のUSB-ACアダプターについては、P. 27を参照してください。

充電のしかた (つづき)

＊充電の目安

- 約 1.5 時間で充電が完了します。
- 1 回のフル充電で、約 12 回使用できます。
(周囲温度など使用条件によって異なります。)
- モードランプが 3 回点滅したら充電してください。

充電終了後

コンセントから USB-AC アダプターを抜き、本体の接続端子から USB コネクタを取り外します。


⚠ USBケーブルの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。

断線、ショート・発火・けがの原因となります。

- 常に USB ケーブルはゆとりをもった状態で使用する。(図①)
- 屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。(図②③)
- USB ケーブルによじれをおこさない。(図④)
- 本体に USB ケーブルを巻きつけ、収納しない。(図⑤)

※USB ケーブルが異常に熱を持っているときは使用しない。

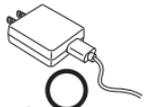

図①

余裕を持って
ご使用いただく



図②


引っ張って使用しない



図③



図④

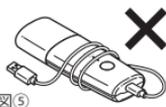

図⑤

ご使用になる前に

⚠ 警告

使用中痛みや不調を感じたときや、使用后肌に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談する。
事故や体調不良、肌のトラブルなどの原因となります。

⚠ 注意

肌に傷や炎症がある場合は絶対に使用しない。
肌のトラブルや痛みの原因となります。

イヤリングやピアス、ネックレスなどのアクセサリー、コンタクトレンズは外して使用する。
事故やトラブルの原因となります。

モードについて

※使用頻度・使用時間を必ず守ってください。

Clean1

超音波ピーリング・・・週1～2回、1回に約5分のトリートメント
角質・毛穴の汚れを浮かし出し、除去します。

Clean2

超音波ピーリング+クレンジング・・・週1～2回、1回に約5分のトリートメント
通常の洗顔では落としきれない微細な汚れを落とします。

Moist

超音波+保湿ケア・・・週2～3回、1回に約5分のトリートメント
美容液の美容成分を皮フの角質層まで浸透させます。

トリートメント前の準備

- 洗顔をして、メイク、皮脂、汚れなどを落として、肌を清潔な状態にします。
- 身につけているアクセサリー類、貴金属類は外します。
- 本体からミラー付キャップを取り外します。



本体の側面を持って、ミラー付キャップを引き抜いてください。



Clean1

使用頻度

1回の使用時間

自動電源OFF
約5分

超音波ピーリング (週1～2回・約5分)



注意

乾いた肌への使用は絶対にしてはなりません。
肌のトラブルの原因となります。

1 肌にお手持ちの化粧水または水を塗布します。


お願い

・必ず肌をぬらしてご使用ください。

2 電源を入れて、「Clean1」モードを選択します。


電源/モード切替ボタンを長押しして、電源を入れます。
はじめて電源を入れると「Clean1」モードが選択されています。

※この商品は充電しながらのご使用はできません。

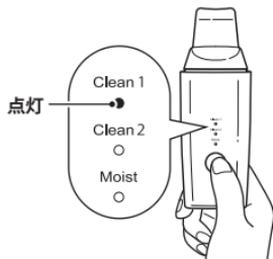

3 ケアをはじめます。

スパチュラを肌に軽く押し当て、ゆっくりと動かします。
・すべらす目安は、5秒間に10cmぐらいのスピードです。

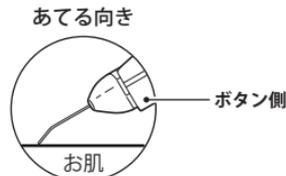

・「超音波ピーリング」は、週1～2回、1回に5分以内にしてください。
約5分経過すると、自動的に電源が切れます。

お願い

- スパチュラは肌の同一部に留めず、移動させてご使用ください。また同一箇所にも何度も使用しないでください。肌のトラブル、体調不良などの原因となります。
- スパチュラがすべりにくい場合は、化粧水または水を追加してください。
- スパチュラを肌に強く押し当てないでください。肌のトラブルの原因となります。

動かしかた



下から上に向けてゆっくり動かします。

● 顎&口元



● フェイスライン・頬・額



● 小鼻周り



使用後

4 電源/モード切替ボタンを長押しして、電源を切ります。

- スパチュラや本体についた汚れをやわらかい布やティッシュなどで拭き取ってください。

お願い

- 連続使用はしないでください。肌には負担がかかり、肌のトラブルの原因となります。





Clean2

使用頻度

1回の使用時間

自動電源OFF
約5分

超音波ピーリング+クレンジング (週1~2回・約5分)



注意

乾いた肌への使用は絶対にしない。
肌のトラブルの原因となります。

1 肌にお手持ちの化粧水または水を塗布します。


お願い

・必ず肌をぬらしてご使用ください。

2 電源を入れて、「Clean2」モードを選択します。

①電源/モード切替ボタンを長押しして、電源を入れます。
はじめて電源を入れると「Clean1」モードが選択されています。

※この商品は充電しながらのご使用はできません。

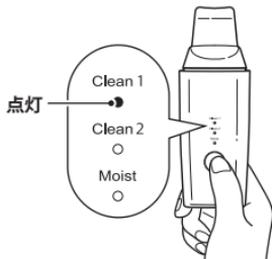

②電源/モード切替ボタンを1回押して、「Clean2」モードを選択します。




3 ケアをはじめます。

①本体のアースに素手が触れるように握ります。

お願い

- ご使用中、本体のアースが素手に触れていないと、ケアができません。必ず左右いずれかのアースに素手が触れるよう本体を握ってください。

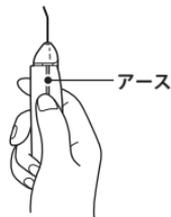


②スパチュラを肌に軽く押し当て、ゆっくりと動かします。

・すべらす目安は、5秒間に10cmぐらいのスピードです。



あてる向き

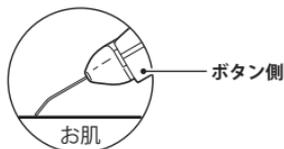

- ・「超音波ピーリング+クレンジング」は、週1～2回、1回に5分以内にしてください。約5分経過すると、自動的に電源が切れます。

お願い

- ・スパチュラは肌の同一部に留めず、移動させてご使用ください。また同一箇所にも何度も使用しないでください。肌のトラブル、体調不良などの原因となります。
- ・スパチュラがすべりにくい場合は、化粧水または水を追加してください。
- ・スパチュラを肌に強く押し当てないでください。肌のトラブルの原因となります。

Clean2



超音波ピーリング+クレンジング(つづき)

動かしかた



下から上に向けてゆっくり動かします。

● 顎&口元



● フェイスライン・頬・額



● 小鼻周り



使用後

4 電源/モード切替ボタンを長押しして、電源を切ります。

- ・スパチュラや本体についた汚れをやわらかい布やティッシュなどで拭き取ってください。

お願い

- ・連続使用はしないでください。
肌に負担がかかり、肌のトラブルの原因となります。





Moist

使用頻度

1回の使用時間

自動電源OFF
約5分

超音波＋保湿ケア (週2～3回・約5分)



注意

乾いた肌への使用は絶対しない。
肌のトラブルの原因となります。

1 肌にお手持ちの化粧水または美容液を塗布します。

お願い

・必ず肌をぬらしてご使用ください。

2 電源を入れて、「Moist」モードを選択します。

- ①電源/モード切替ボタンを長押しして、電源を入れます。
はじめて電源を入れると「Clean1」モードが選択されています。

※この商品は充電しながらのご使用はできません。



- ②電源/モード切替ボタンを2回押しして、「Moist」モードを選択します。



Moist




超音波+保湿ケア (つづき)

3 ケアをはじめます。

①本体のアースに素手が触れるように握ります。

お願い

- ご使用中、本体のアースが素手に触れていないと、ケアができません。必ず左右いずれかのアースに素手が触れるよう本体を握ってください。

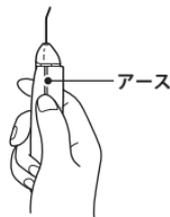


②スパチュラを肌に軽く押し当て、ゆっくりと動かします。

- すべらす目安は、5秒間に10cmぐらいのスピードです。



あてる向き

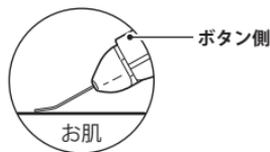

- 「超音波+保湿ケア」は、週2～3回、1回に5分以内にしてください。約5分経過すると、自動的に電源が切れます。

お願い

- スパチュラは肌の同一部に留めず、移動させてご使用ください。また同一箇所にも何度も使用しないでください。肌のトラブル、体調不良などの原因となります。
- スパチュラがすべりにくい場合は、化粧水または美容液を追加してください。
- スパチュラを肌に強く押し当てないでください。肌のトラブルの原因となります。

動かしかた



下から上に向けてゆっくり動かします。

● 顎&口元



● フェイスライン・頬・額



● 小鼻周り



使用後

4 電源/モード切替ボタンを長押しして、電源を切ります。

- ・スパチュラや本体についた化粧水や美容液をやわらかい布やティッシュなどで拭き取ってください。

お願い

- ・連続使用はしないでください。
肌に負担がかかり、肌のトラブルの原因となります。



お手入れと保管のしかた

●必ず電源を切り、USBケーブルを取り外してから行ってください。

＊ スパチュラ

こびりついた化粧品・美容液などの汚れは、水分を含ませて固くしぼった布で拭き取ります。

＊ 本体・ミラー付キャップ

汚れは、やわらかい布やティッシュなどで拭き取ります。

ミラー付キャップのミラーにくもり汚れを感じたときは

その都度乾いたやわらかい布で拭き取ります。

こびりついた化粧品や指紋などの汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取った後、水分や洗剤が残らないように乾いたやわらかい布でから拭きします。



⚠ 警告

水洗い掃除を絶対にしない。
感電・発火・ショートの原因となります。

⚠ 注意

ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。
ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。

保管のしかた

ミラー付キャップを取り付けて、お子様の手の届かない所、湿気やほこりの少ない所に保管します。

⚠ 注意

浴室などの水のかかる所や、湿気の多い所に放置しない。
故障の原因となります。

直射日光の当たるところ、熱器具の近くに放置しない。
変形・変色・故障の原因となります。

故障かなと思ったら

以下の点をお調べください。

症状	チェックポイント	処置のしかた
スパチュラが振動しない。	充電されていますか？	約1.5時間充電してください。 (P.11～P.13参照)
	充電中ではありませんか？	この商品は充電しながらのご使用はできません。
充電できない。	USBコネクタが本体の接続端子やUSB-ACアダプターのUSB接続端子から抜けていませんか？	確実に差し込んでください。
	USB-ACアダプターがコンセントから抜けていませんか？	確実に差し込んでください。

★長年ご使用の超音波ピーリングの点検を！		
愛情点検 	<p>ご使用の際このようなことはありませんか？</p> <ul style="list-style-type: none">●電源を入れても、ときどき運転しない時がある。●USBケーブルを折り曲げると通電したり、しなかったりする。●運転中に異常な音がする。●こげくさい臭いがする。●その他の異常、故障がある。	<p>ご使用中</p> <p>このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源を切り、USBケーブルを取り外して必ず販売店にご相談ください。</p>



Q&A よくある質問

お客様からよく寄せられるご質問を掲載しております。

Q 顔以外（体など）にも使っても良いですか？

A 顔専用です。顔以外には使用しないでください。

Q 1日に何度使っても大丈夫ですか？

A 以下の使用頻度・使用時間を守ってご使用ください。

- ・ **Clean1** 超音波ピーリング：週1～2回（1回に約5分）
- ・ **Clean2** 超音波ピーリング＋クレンジング：週1～2回（1回に約5分）
- ・ **Moist** 超音波＋保湿ケア：週2～3回（1回に約5分）

※同一箇所にも何度も使用しないでください。

Q 肌に「ピリピリ感」を感じるのですが…

A ・「Clean1」モード／「Clean2」モード時には、お手持ちの化粧水または水を追加してください。
・「Moist」モード時にはお手持ちの化粧水または美容液を追加してご使用ください。
それでも肌に違和感を感じる場合は、直ちにご使用を中止し、専門医にご相談ください。
そのままご使用を続けますと、事故や体調不良、肌トラブルの原因となります。

Q メイク落としに使用できますか？

A メイクを落とすことはできません。
洗顔をして、メイク、皮脂、汚れなどを落とし、肌を清潔な状態にした後、ご使用ください。

●「Clean1」モード／「Clean2」モード

Q 必ず化粧水や水をつけなければならないのですか？

A 乾いた肌に使用されますと、肌に大きな負担がかかってしまいますので、お手持ちの化粧水または水を必ずつけてご使用ください。

●「Moist」モード

Q 使用する化粧水や美容液はどんなものでも良いですか？

A 水溶性のものをご使用ください。油が含まれていると、十分な効果を得られません。また、防腐剤（パラベン・エタノールなど）や香料が含まれていないものをご使用ください。防腐剤や香料が肌に刺激を与えることがあり、肌のトラブルの原因となります。

製品を廃棄するとき

※お客様による充電電池の修理、交換はできません。



警告

本製品を分解しない。
火災・感電・けがの原因となります。

***** 充電電池リサイクルにご協力を



Li-ion

本製品はリチウムイオンポリマー電池を内蔵しています。ご使用済みのリチウムイオンポリマー電池は、貴重な資源です。再利用することができますので、廃棄せず、テープなどで接続端子をふさいだ上で、充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、下記的一般社団法人JBRCのホームページを参照してください。

<http://www.jbrc.com>

仕様

電 源	充電式 (市販または当社別売部品のUSB-ACアダプター使用)
定格入力	DC5V 1A
使用電池	リチウムイオンポリマー充電電池 DC3.7V 550mAh
消費電力	5W (充電時)
寸 法	約48 (W) ×25 (D) ×139 (H) mm (ミラー付キャップ装着時)
質 量	約110g (ミラー付キャップ装着時)
充電時間	約1.5時間
連続使用時間	約60分
付 属 品	USBケーブル、ミラー付キャップ、取扱説明書 (本書：保証書付)

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

別売部品について

●別売部品を依頼される場合は、小泉成器株式会社「部品センター」にお問い合わせください。

名 称	型 番
USB-ACアダプター	KTH-9020

アフターサービスについて

1. 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- 超音波ピーリングの補修用性能部品の保有期間は製造切後5年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06 (6262) 3561 FAX.06 (6268) 1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL.048 (718) 3340 FAX.048 (718) 3350

西日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL.06 (6613) 3145 FAX.06 (6613) 3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL.06 (6613) 3211 FAX.06 (6613) 3299

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL.06 (6262) 3561 FAX.06 (6268) 1432

受付時間：平日9：00～17：30
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2021年11月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

【保証・無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3. **ご購入、ご購入品等**で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輦、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

超音波ピーリング

保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	KBE-2730		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理 保証期間	対象部分	期間（お買い上げ日より）	
	本体	1年	
お客様	お名前	様	
	ご住所		
販売店	店名・住所・電話		

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561