

KOIZUMI

家庭用

国内・海外両用

ピーリング & 超音波美顔器 KBE-2740

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

保証書付



このたびはコイズミ ピーリング & 超音波美顔器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後は、大切に保管してください。

小泉成器株式会社

目 次

安全上のご注意	2~10
BEFORE USE	11
海外使用の手引き	11~12
各部のなまえ	13~14
充電のしかた	15~17
モードについて	18
ご使用になる前に	18
正しい使いかた【Cleanモード (Low/High)】.....	19~22
正しい使いかた【Moistモード】	23~25
お手入れと保管のしかた	26
故障かな？と思ったら	27
製品を廃棄するとき	28
Q&A よくある質問	29~30
仕様	31
別売部品について	31
アフターサービスについて	32
お客様の個人情報のお取り扱いについて	33
お客様相談窓口	33
保証・無料修理規定	34
保証書	35

安全上のご注意

*ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が切迫しているもの

警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示例と絵表示の意味



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

⚠ 危険

下記のような医療用電子機器をお使いの方は絶対に使用しない。

- ・ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器
- ・人工心肺などの生命維持用医療用電子機器
- ・心電計などの装着型の医療用電子機器

医療用電子機器の誤動作をまねく恐れがあります。

高温になる場所（火やストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生する場所で使用したり放置したりしない。

室温5℃～35℃の環境で使用・充電・保管してください。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

電子レンジや高圧容器などの中に本体・USB-ACアダプター・USBケーブルを入れない。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

火の中に投入したり、加熱しない。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

接続端子をショートさせない。接続端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させない。

火災・故障の原因となります。

⚠ 警告



改造はしない。修理技術者以外の人には分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にご相談ください。



使用中痛みや不調を感じたときや、使用后肌に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談する。

事故・体調不良・肌のトラブルなどの原因となります。

USBケーブルは必ずゆとりを持たせて使用する。

USBケーブルが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

USB-ACアダプター・USBケーブルは清潔にする。刃や刃の取付面・コネクタにほこりが付着している場合は拭き取る。

ショート・火災の原因となります。

USB-ACアダプター・USBケーブルが破損した場合は、直ちに使用を中止する。

感電・ショート・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にご相談ください。

必ずAC100-240Vで使用する。(国内・海外両用)

火災・感電の原因となります。

当商品で遊ぶことがないように、子供から目を離さない。

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



落としたり投げつけるなど強い衝撃を与えない。

破裂・発熱・発火・液漏れ・故障の原因となります。

⚠ 警告

次のような方は、使用しない。

- 心臓に障害のある人
- 急性疾患の人
- 有熱性疾患の人
- 血圧異常の人
- 感染性疾患の人
- 結核性疾患の人
- 悪性腫瘍の人
- 顔面神経痛の人
- 妊娠中の人
- 生理中の人
- アトピー性皮膚炎の人
- アレルギー体質の人
- 特に肌が敏感な人
- 血友病疾患の人
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- 飲酒や薬を服用中の人
- 過度の日焼け直後で赤くヒリヒリし、炎症を起こしている人
- 体調が特にすぐれない人、疲労が激しい人
- 化学繊維でかぶれた経験のある人

事故・トラブルの恐れがあります。

下記の部位には、使用しない。

- 整形手術をした部位
- 眼球および上まぶた・唇・首
- 傷口
- 顔面黒皮症
- 口の中など粘膜の部位
- ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位
- 感覚、知覚障害を起こしている部位
- 皮フの下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部位
- カユミやホテリ、物理的刺激による病的なシミのある部位
- 過度の日焼けで炎症を起こしている部位
- 化粧品などで皮フ炎を起こしている部位

事故・肌のトラブルの恐れがあります。

コンセントや接続端子の差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。

子供に使用させたり、乳幼児の手の届く場所で使用しない。

事故・感電・けがの原因となります。

梱包材を子供の手の届く場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして窒息する恐れがあります。

⚠ 警告

USBケーブルが傷んだり、接続端子の差し込みがゆるいときは使用しない。


感電・ショート・発火の原因となります。

USBケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重い物を載せたり、はさみ込んだり、高温部に近づけたりしない。

USBケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

本体にUSBケーブルを巻き付けない。また、USBケーブルを束ねたまま使用しない。

USBケーブルがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。

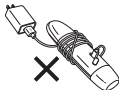

次のようなときは使用しない。

- コンセントに差し込んだUSB-ACアダプターがグラグラ動く。
- USB-ACアダプターや本体が異常に熱い、または煙が出ている。
- USBケーブルに深い傷がある。
- USB-ACアダプター・USBケーブルがこげている。

雷が鳴り出したら、USB-ACアダプター・USBケーブルに触れない。

落雷による感電の原因となります。


業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。

連続過負荷による故障の恐れがあります。

出力電圧がDC5V以外の機器で使用しない。

火災・感電の原因となります。

⚠ 警告

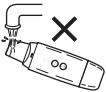	専用のUSB-ACアダプター・USBケーブルで、他の商品を使用したり、充電したりしない。また、専用のUSB-ACアダプター・USBケーブル以外は使用しない。 異常発熱による発火・ショートの原因となります。
	USBケーブルがよじれたままでは使用しない。 ショートして火花が出ることがあります。 
	浴室など水のかかる場所や湿気の多い場所で使用したり、充電しない。また水洗い掃除を絶対にしない。 感電・発火・ショートの原因となります。 
	水をかけたり、水につけたりしない。 ショート・感電の原因となります。 ぬれた手でUSB-ACアダプター・USBケーブルを抜き差ししたり、ぬれた手で使用しない。 ショート・感電の原因となります。
	使用時以外は必ず電源を切る。また、充電時以外はUSB-ACアダプターをコンセントから抜いて、USBケーブルを接続端子から取りはずす。 けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

⚠ 注意

顔のお手入れ以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。

事故・トラブルにつながる恐れがあります。

ご使用前に、スパチュラ・ヘッドに破損がないか確認する。
肌を傷付ける原因となります。

USB ケーブルを抜くときは、必ず先端のコネクタを持って引き抜く。

感電・ショートして発火することがあります。

本体・スパチュラ・ヘッドのお手入れをするときは、必ず電源を切り、USB-AC アダプター・USB ケーブルを取りはずす。

感電・けがの原因となります。

使いはじめや敏感肌の方は使用時間を短めにし、お肌の様子を見ながら使用する。また Clean モード使用時はレベル [Low] から使用する。

事故・肌荒れなどのトラブルの原因となります。

イヤリングやネックレスなどのアクセサリー、コンタクトレンズは、はずして使用する。

事故・トラブルの原因となります。

ひどい肌荒れや皮フ表面に凹凸がある場合またはうぶ毛やヒゲなどによって、まれに刺激を強く感じる場合があります。その際には、その部位への使用を控える。

事故・トラブルの原因となります。

スパチュラ・ヘッドは肌の同一部位に留めず移動させて使用する。

体調不良・肌のトラブルの原因となります。

⚠ 注意



ご使用のたびに、スパチュラ・ヘッドのお手入れをする。
肌のトラブルの原因となります。

乾いた肌には絶対に使用しない。
肌のトラブルの原因となります。

肌に傷や炎症がある場合は絶対に使用しない。
肌のトラブルや痛みの原因となります。

脱毛・剃毛処理した当日は同部位への使用はしない。
腫れたり、赤みが出る恐れがあります。

規定時間以上の使用はしない。
肌のトラブルの原因となります。



連続使用はしない。
肌のトラブルの原因となります。

スパチュラ・ヘッドを肌に強く押し当てない。
肌のトラブルの原因となります。

化粧水や美容液は、水溶性の物以外使用しない。また、
防腐剤（パラベン・エタノールなど）や香料が含まれている
物は使用しない。
肌のトラブルの原因となります。

スパチュラ・ヘッドを肌以外の異物に触れさせない。
事故・トラブルにつながる恐れがあります。

⚠ 注意

	家族や他人と共用しない。 感染・炎症の原因となります。
	通電したまま放置しない。 事故・トラブルの原因となります。
	本体・スパチュラ・ヘッドのお手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。 ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。
	USB-ACアダプター・USBケーブルを取り付けたまま持ち運んだり、保管したりしない。 故障やUSBケーブルの断線の原因となります。
	パソコンなどのUSB接続端子で、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しない。 パソコンなどに障害を与え、データ消失・故障の原因となる恐れがあります。
	パソコンなどの機器と接続した状態で、強い振動や衝撃を与えない。 接続したパソコンなどに障害を与え、データ消失・故障の原因となります。
	直射日光の当たる場所で使用したり放置したりしない。 変形・変色・故障の原因となります。
	浴室など水のかかる場所や湿気の多い場所に保管しない。 絶縁劣化により感電することがあります。



BEFORE USE

1. Before using, please check the voltage and type of plug at your location.

〈ご使用前に、使用する国の電圧およびプラグの形状を確認してください。〉

2. Before using, please confirm the shape of the plug socket, and choose plug adaptor.

〈ご使用前に、電源コンセントの形状を確認して、プラグアダプターを選んでください。〉

3. Before using, be sure to check the voltage and type of plug, because the voltage and the type of plug, may differ according to the area even in the same country.

〈国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、ご使用前に、電圧・プラグ形状を充分確認してください。〉



海外使用の手引き

- 当商品は「AC100-240V」の地域で使用できます。
- 飛行機に持ち込む際は各航空会社へお問い合わせください。
- ご使用前に、使用する国の電源コンセントの形状を確認してください。
※世界の電圧とプラグの一覧は、12ページに掲載しています。
- 当商品をAタイプ適用外の国でご使用の際は、使用する国の電源コンセントにあったプラグアダプターをご用意ください。

Aタイプ	B3タイプ	BFタイプ	Cタイプ	Oタイプ
商品のプラグ形状 ※そのまま使用でき ます。 	 	 	 	 

注) 国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、現地で充分お確かめの上、ご使用ください。

世界の電圧とプラグ


※同じ国でも地域によって電圧やプラグの形が一定ではなく、表と異なる場合があります。

事前に現地のホテルや旅行代理店でご確認の上、ご使用ください。


地 域・国 名 Area・Countries			電 圧 Voltage	プラグ Plug
アジア	インド	India	115/230/240	B3, BF, C
	インドネシア	Indonesia	127/220/230	A, B3, BF, C
	シンガポール	Singapore	115/230	B3, BF
	タイ	Thailand	220	A, BF, C
	韓国	Korea	110/220	A, BF, C, O
	中国	China, Rep.	110/220	A, B3, BF, C, O
	日本	Japan	100	A
	フィリピン	Philippines	120/230/240	A, B3, BF, C, O
	ベトナム	Vietnam	110/220	A, C
北米	マレーシア	Malaysia	240	B3, BF, C
	アメリカ	U.S.A	120	A
	ハワイ	Hawaii	120	A
中南米	カナダ	Canada	120/240	A, BF
	アルゼンチン	Argentina	220	BF, C, O
	ブラジル	Brazil	127/220	A, C
ヨーロッパ	プエルトリコ	Puertorico	120/240	A
	メキシコ	Mexico	120/127/230	A
	イギリス	England	230/240	B3, BF, O
	イタリア	Italy	125/220	C
	オーストリア	Austria	230	B3, C
	オランダ	Netherlands	230	C
	ギリシャ	Greece	230	B3, C
	スイス	Switzerland	230	B3, BF, C
	スウェーデン	Sweden	230	C
	スペイン	Spain	127/220	A, C
	ロシア	Russia	127/220	A, C
	デンマーク	Denmark	230	C
	ドイツ	Germany	127/230	C
	ノルウェー	Norway	230	C
	ハンガリー	Hungary	220	C
オセアニア	フィンランド	Finland	120/230	C
	フランス	France	127/230	C, O
	ベルギー	Belgium	127/230	C
	オーストラリア	Australia	240/250	O
	グアム	Guam	120/240	A
	サイパン	Saipan	110	A
	トンガ王国	Tonga	240	O
中近東	ニュージーランド	New Zealand	230/240	O
	フィジー	Fiji	120/240	A, C, O
	アラブ首長国連邦	United of Arab Emiraes	220/240	B3, BF, C
	クウェート	Kuwait	240	B3, BF, C
アフリカ	トルコ	Turkey	220	A, C
	エジプト・アラブ共和国	Arab Rep. of Egypt	220	B3, BF, C
	南アフリカ共和国	South Africa, Rep.	220/230/250	B3, BF, C
	モロッコ	Morocco	115/127/220	C

各部のなまえ

本体

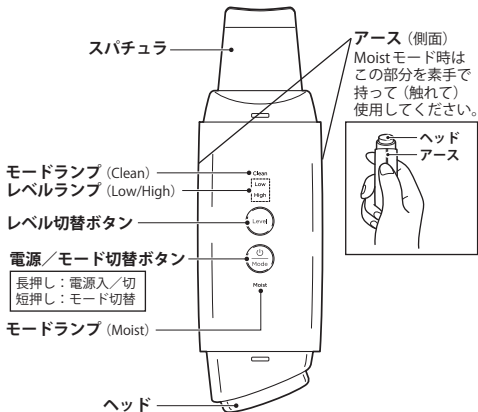


背面

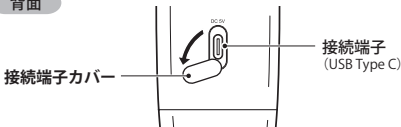


● USB-AC アダプター ※

型番：KTH-9022
(ZD5C050100JP)

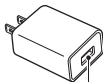

USB 接続端子
(USB Type A)

● USB ケーブル ※

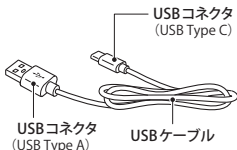

USB コネクタ
(USB Type C)

USB コネクタ
(USB Type A)

USB ケーブル

● スパチュラキャップ ※

※梱包時は本体に取り付けられています。



● ヘッドキャップ ※

※梱包時は本体に取り付けられています。



名称の横に※が付いているものは付属品です。

充電のしかた

- 初めて使用する場合は、必ず充電してください。
- 長期間放置しておくと電圧が低下する場合がありますので、使い始めなどには充電してください。
- 充電は、専用のUSB-ACアダプター・USBケーブルをご使用ください。
- パソコンなどに接続しても充電できますが、環境によって正常に充電できない場合があります。

※パソコンなどに接続した場合のデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。
データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。



警告

- ・専用のUSB-ACアダプター・USBケーブルで、他の商品を使用したり、充電したりしない。また、専用のUSB-ACアダプター・USBケーブル以外は使用しない。
異常発熱による発火・ショートの原因となります。
- ・出力電圧がDC5V以外の機器で使用しない。
火災・感電の原因となります。




注意

パソコンなどのUSB接続端子で、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しない。
パソコンなどに障害を与え、データ消失・故障の原因となる恐れがあります。

- 充電完了後、USBケーブルを取りはずしてご使用ください。

-
- 1 USBケーブルのUSBコネクタ (USB Type A) を USB-ACアダプターのUSB接続端子に差し込みます。
 - 2 接続端子カバーをめくり、USBケーブルのUSBコネクタ (USB Type C) を本体の接続端子に差し込みます。
 - 3 USB-ACアダプターをコンセントに差し込みます。
・ 充電中、モードランプ・レベルランプがすべて点滅します。

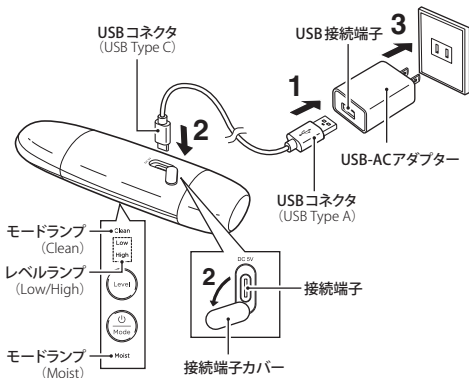

※充電中は、本体・USB-ACアダプターが多少熱くなりますが、異常ではありません。

充電のしかた (つづき)

充電の目安

- 約1.5時間で充電が完了し、モードランプ・レベルランプが消灯します。
- 1回のフル充電でCleanモードは約30回、Moistモードは約15回使用できます。
(周囲温度など使用条件によって異なります。)
- 使用中、動作中の各モードランプが赤色に点滅したら、充電残量が少なくなっていますので、充電してください。
- 充電残量が完全になくなったら、モードランプ・レベルランプが赤色に3回点滅し、電源が切れます。

充電完了後


- ①コンセントからUSB-ACアダプターを抜き、本体の接続端子からUSBコネクタを取りはずします。
- ②接続端子カバーを接続端子にはめます。

⚠ USBケーブルの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。

USBケーブルが断線し、ショート・発火・けがの原因となります。

- 常にUSBケーブルはゆとりをもった状態で使用する。(図①)
 - 屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。(図②③)
 - USBケーブルによじれをおこさない。(図④)
 - 本体にUSBケーブルを巻き付け、収納しない。(図⑤)
- ※USBケーブルが異常に熱を持っているときは使用しない。

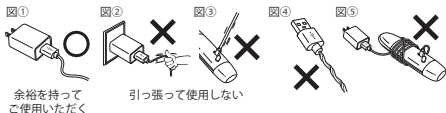

モードについて

●電源／モード切替ボタンを押すたびにモードが切り替わります。

Clean モード

超音波ピーリング（クレンジング）
（週1～2回※、1回に約5分のトリートメント）

- ・通常の洗顔では落としきれない微細な汚れを落とします。
 - ・レベル [Low] または [High] を選択できます。
- ※レベル [Low] と [High] を合わせて週1～2回以内でご利用ください。

Moist モード

超音波＋保湿ケア（イオン導入）
（週2～3回、1回に約5分のトリートメント）

- ・美容液の美容成分を皮フの角質層まで浸透させます。

※使用頻度・使用時間を必ず守ってください。

ご使用になる前に

⚠ 警告

使用中痛みや不調を感じたときや、使用後肌に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談する。
事故・体調不良、肌のトラブルなどの原因となります。

⚠ 注意

- ・肌に傷や炎症がある場合は絶対に使用しない。
肌のトラブルや痛みの原因となります。
- ・イヤリングやピアス、ネックレスなどのアクセサリ、コンタクトレンズははずして使用する。
事故・トラブルの原因となります。

ケア前の準備

- ・洗顔をして、メイク、皮脂、汚れなどを落として、肌を清潔な状態にします。
- ・身に付けているアクセサリ類、貴金属類ははずします。

正しい使いかた【Cleanモード (Low/High)】

使用頻度：週1～2回 1回の使用時間：約5分

自動電源OFF
約5分

⚠ 注意

- ・乾いた肌には絶対に使用しない。
肌のトラブルの原因となります。
- ・化粧水は、水溶性の物以外使用しない。また、防腐剤（パラベン・エタノールなど）や香料が含まれている物は使用しない。
肌のトラブルの原因となります。

※この商品は充電しながらのご使用はできません。

1 スパチュラキャップをはずします。


2 肌にお手持ちの化粧水または水を塗布します。

- ・必ず肌をぬらしてご使用ください。



3 電源／モード切替ボタンを
3秒以上長押しして、電源を入れます。

- ・ Cleanモードのレベル [Low] で運転を開始します。
(モードランプ [Clean] とレベルランプ [Low] が点灯します。)

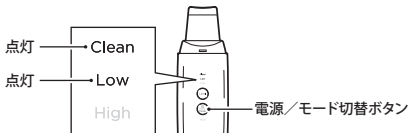

4 お好みでレベルを切り替えます。


- ・レベル切替ボタンを押すたびにレベルが切り替わります。
(レベルランプが切り替わります。)

レベル [Low] : 断続的に振動します。

レベル [High] : 連続で振動します。

※振動の強さは変わりません。

※「ジー」と音がありますが
異常ではありません。

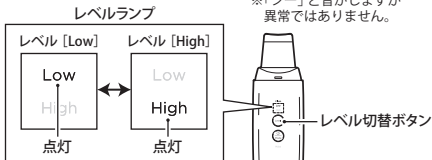

注意

使いはじめや敏感肌の方は使用時間を短めにし、お肌の様子を見ながら使用する。またレベル [Low] から使用する。
事故・肌荒れなどのトラブルの原因となります。

5 ケアをはじめます。

スパチュラを肌に軽く押し当て、ゆっくりと動かします。

- ・すべらす目安は、5秒間に10cm ぐらいのスピードです。
- ・スパチュラがすべりにくい場合は、化粧水または水を追加してください。



当てる向き



※使用中スパチュラがあたたくなる場合がありますが、
異常ではありません。

正しい使いかた【Cleanモード (Low/High)】(つづき)

動かしかた

下から上に向けて
ゆっくり動かします。



●フェイスライン・頬・額

●顎&口元

●小鼻周り



- Cleanモードはレベル [Low] と [High] を合わせて、週1～2回、1回に5分以内にしてください。

約5分経過すると、自動的に電源が切れます。

⚠ 注意

- スパチュラは肌の同一部位に留めず移動させて使用する。
体調不良・肌のトラブルの原因となります。
- 連続使用はしない。
肌のトラブルの原因となります。

.....

手動で電源を切るには

電源／モード切替ボタンを**3秒以上長押し**します。

- ・ モードランプ [Clean] とレベルランプが消灯します。

6 使用後

- ・ 本体・スパチュラをお手入れします。(P. 26 参照)



正しい使いかた【Moistモード】

使用頻度：週2～3回 1回の使用時間：約5分

自動電源OFF
約5分

⚠ 注意

- ・乾いた肌には絶対に使用しない。
肌のトラブルの原因となります。
- ・化粧水や美容液は、水溶性の物以外使用しない。また、防腐剤（パラベン・エタノールなど）や香料が含まれている物は使用しない。
肌のトラブルの原因となります。

※この商品は充電しながらのご使用はできません。


1 ヘッドキャップをはずします。

2 肌にお手持ちの化粧水または美容液を塗布します。
・必ず肌をぬらしてご使用ください。



3 電源／モード切替ボタンを
3秒以上長押しして、電源を入れます。

- ・ Cleanモードのレベル [Low] で運転を開始します。
(モードランプ [Clean] とレベルランプ [Low] が点灯します。)

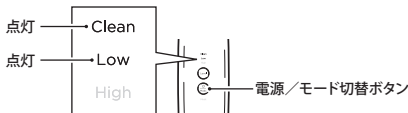

4 電源／モード切替ボタンを押して、Moistモードに切り替えます。

(モードランプ [Clean] とレベルランプ [Low] が消灯し、モードランプ [Moist] が点灯します。)

※Moistモードでは振動を感じにくくなります。



※「ジー」と音が出ますが異常ではありません。

5 ケアをはじめます。

- ①ヘッドを上にして、本体のアースに素手が触れるように握ります。

※ご使用中、本体のアースが素手に触れていないと、イオン導入ができません。必ず左右いずれかのアースに素手が触れるよう本体を握ってください。



- ②ヘッドを肌に軽く押し当て、ゆっくりと動かします。

・ヘッドがすべりにくい場合は、化粧水または美容液を追加してください。

動かしかた

下から上に向けて
ゆっくり動かします。



※使用中ヘッドがあたたかくなる場合がありますが、異常ではありません。

正しい使いかた【Moistモード】(つづき)

- Moistモードは、週2～3回、1回に5分以内にしてください。
約5分経過すると、自動的に電源が切れます。

注意

- ヘッドは肌の同一部位に留めず移動させて使用する。
体調不良・肌のトラブルの原因となります。
- 連続使用はしない。
肌のトラブルの原因となります。

手動で電源を切るには

電源／モード切替ボタンを**3秒以上長押し**します。

- モードランプ [Moist] が消灯します。

6 使用後

- 本体・ヘッドをお手入れします。(P. 26 参照)



お手入れと保管のしかた

- 必ず電源を切ってUSB-ACアダプターをコンセントから抜き、USBケーブルを取りはずしてから行ってください。

お手入れ

(スパチュラ・ヘッド) ※ご使用のたびに、お手入れしてください。

こびり付いた化粧品・美容液などの汚れは、水分を含ませて固くしぼった布で拭き取ってください。



本体

やわらかい布やティッシュなどで汚れを拭き取ってください。



警告

水洗い掃除を絶対にしない。
感電・発火・ショートの原因となります。



注意

ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。
ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。

保管

スパチュラキャップ・ヘッドキャップを取り付けて、お子様の手の届かない場所、湿気やほこりの少ない場所に保管してください。



危険

高温になる場所（火やストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生する場所で放置しない。
発火・火災・破裂・故障の原因となります。



注意

- ・浴室などの水のかかる場所や、湿気の多い場所に保管しない。
絶縁劣化により感電することがあります。
- ・直射日光の当たる場所に放置しない。
変形・変色・故障の原因となります。



故障かな?と思ったら

●修理を依頼される前に以下の点をお調べください。

こんな場合	点 検	処置のしかた
スパチュラが振動しない。	充電されていますか?	約1.5時間充電してください。 (P. 15～P. 17参照)
	充電中ではありませんか?	この商品は充電しながらのご使用はできません。
	電源／モード切替ボタンを3秒以上長押ししていますか?	電源／モード切替ボタンを3秒以上長押ししてください。
Moistモード時、ヘッドが振動しない。	Moistモードでは振動を感じにくくなります。	
ヘッドとスパチュラがあたたかい。	使用中は、超音波振動であたたかくなる場合がありますが、異常ではありません。	
充電できない。	USBコネクタが本体の接続端子やUSB-ACアダプターのUSB接続端子から抜けていませんか?	確実に差し込んでください。
	USB-ACアダプターがコンセントから抜けていませんか?	確実に差し込んでください。

製品を廃棄するとき

※お客様による充電電池の修理、交換はできません。



警告

本製品を分解しない。

火災・感電・けがの原因となります。

充電電池リサイクルにご協力を



本製品は充電電池を内蔵しています。ご使用済みの充電電池は、リサイクルすることができる貴重な資源です。ご使用済みの充電電池の廃棄に際しては、動かなくなるまで運転してから、接続端子にテープ（セロハンテープ、ビニールテープ、ガムテープなど）を貼り、電流が流れない状態（絶縁）にしてから、お住いの自治体にお問い合わせください。

愛情点検



★長年ご使用のピーリング＆超音波美顔器の点検を！

ご使用の際
このような
ことはありませんか？

- 電源を入れても、ときどき動作しないときがある。
- USBケーブルを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音ができる。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中 止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントからUSB-ACアダプターを抜いてUSBケーブルを取りはずし、必ず販売店にご相談ください。



Q&A よくある質問

●お客様からよく寄せられるご質問を掲載しております。

Q 顔以外（首や体など）にも使っても良いですか？

A 顔専用です。顔以外には使用しないでください。

Q 1日に何度使っても大丈夫ですか？

A 以下の使用頻度・使用時間を守ってご使用ください。

・ **Cleanモード**

超音波ピーリング（クレンジング）：週1～2回（1回に約5分）

・ **Moistモード**

超音波＋保湿ケア（イオン導入）：週2～3回（1回に約5分）

※同一箇所に何度も使用しないでください。

※Cleanモードは「Low」と「High」を合わせて週1～2回以内
でご使用ください。

Q 肌に「ピリピリ感」を感じるのですが…

A Cleanモード時には、お手持ちの化粧水または水を追加してください。

Moistモード時にはお手持ちの化粧水または美容液を追加してご使用ください。

それでも肌に違和感を感じる場合は、直ちにご使用を中止し、専門医にご相談ください。

そのままご使用を続けると、事故・体調不良・肌トラブルの原因となります。

.....

Q Clean (Low/Higjh) モードを使用後、
Moist モードを使っても良いですか？

A お使いいただけます。
各モードの使用頻度・使用時間を守ってご使用ください。

【Cleanモード】

Q 必ず化粧水や水を付けなければならないのですか？

A 乾いた肌に使用されますと、肌に大きな負担がかかり、肌のトラブルの原因となりますので、お手持ちの化粧水または水を必ず付けてご使用ください。

Q メイク落としに使用できますか？

A メイクを落とすことはできません。
洗顔をして、メイク、皮脂、汚れなどを落とし、肌を清潔な状態にした後、ご使用ください。

【Moistモード】

Q 使用する化粧水や美容液はどんな物でも良いですか？

A 水溶性の物をご使用ください。油分が含まれていると、十分な効果を得られません。また、防腐剤（パラベン・エタノールなど）や香料が含まれていない物をご使用ください。
防腐剤や香料が肌に刺激を与えることがあり、肌のトラブルの原因となります。

仕様

■本体

電 源	充電式 (専用USB-ACアダプター使用)
使 用 電 池	リチウムイオン充電電池 (DC3.7V 650mAh)
消 費 電 力	5W (充電時)
寸 法	約46 (W) × 30 (D) × 165 (H) mm (スパチュラキャップ・ヘッドキャップ含む)
質 量	約135 g (スパチュラキャップ・ヘッドキャップ含む)
充 電 時 間	約1.5時間
使 用 回 数	Cleanモード：約30回 Moistモード：約15回
付 属 品	USB-ACアダプター、USBケーブル、 スパチュラキャップ、ヘッドキャップ

■USB-ACアダプター 型番：KTH-9022 (ZD5C050100JP)

入 力	AC100-240V 50/60Hz
出 力	DC5V 1A

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

別売部品について

- 別売部品を依頼される場合は、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

名 称	型 番
USB-ACアダプター	KTH-9022

【アフターサービスについて】

1 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理いたします。

3 補修用性能部品の保有期間

- ピーリング&超音波美顔器の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様相談窓口

製品のお問い合わせ、修理に関するご相談、
部品の購入に関するご相談は



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (07) 5555

※ナビダイヤルが
ご利用いただけない場合

TEL. 03 (3570) 6730

受付時間：平日 9：00～17：00
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

2024年10月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

【保証・無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3. **ご転居、ご贈答品等**で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
 - (ト) 譲渡、転売、リサイクル店（中古品）、中古販売店、オークション等により入手された場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。日本国外からの修理依頼や補修用部品・消耗部品の発送依頼には対応しておりません。
Effective only in Japan. We do not offer repair service or dispatch maintenance parts or consumables internationally.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

ピーリング&超音波美顔器

保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 番	KBE-2740		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理 保証期間	対 象 部 分	期 間（お買い上げ日より）	
	本 体	1 年	
お 客 様	お名前	見 本 様	
	ご住所		
TEL			
販売店	店名・住所・電話		

★販売店の皆様へのお願い

必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しく下さい。

小泉成器株式会社

本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL.06 (6268) 1423