


## 角質ケア KLC-0342

### 取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

保証書付

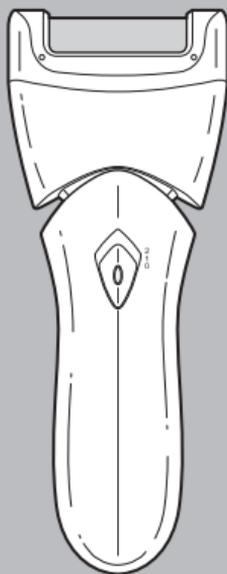

このたびはコイズミ 角質ケアをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後は、大切に保管してください。

# 安全上のご注意

- \*ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- \*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



**警告**

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



**注意**

誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

## 絵表示例と絵表示の意味



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

## ⚠ 警告



改造はしない。修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。  
火災・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にご相談ください。



次のような方は、かかりつけの医師に相談してから使用する。

- 糖尿病の方
- 足の血行障害がある方
- 足の皮膚に腫れ、痛み、熱を持っている方
- 治療中の方

梱包材を子供の手の届く場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして窒息する恐れがあります。



子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届く場所で使用しない。  
けがをする恐れがあります。

## ⚠ 注意



ご使用前に必ずアタッチメントの状態（変形・破損・取り付け状態など）を確認する。

肌を傷付ける原因となります。

本体・アタッチメントのお手入れやアタッチメントを着脱するときは、必ず電源を切る。

けがの原因となります。

周囲に人がいるときは不意の動作に注意して使用する。

事故・けがの恐れがあります。

必ず肌が乾いた状態で使用する。

肌を傷付ける原因となります。

肌にトラブルが生じた場合は使用を中止する。

肌を傷付ける恐れがあります。

肌のトラブルはストレスや体質や内臓疾患なども原因として考えられますので、専門医にご相談ください。

## ▲ 注意

乾電池の取り扱いに関して、以下のことを守る。

- アルカリ乾電池（単3形）以外は使用しない。
- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- 乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐ取り出し、分別廃棄する。
- 長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する。
- 新しい乾電池と古い乾電池または異なった種類の乾電池を混ぜて使用しない。
- 火の中に捨てない。

乾電池の発熱・破裂・破損・液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。



足うらやかかと、足の指のお手入れ以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。

けが・故障の原因となります。

 部分で指をはさまないよう注意する。

けがをする恐れがあります。



次のような方は使用しない。

- アレルギー体質で皮膚の敏感な方
- 肌にかゆみ、痛み、炎症、腫れなど異常のある方
- 皮膚感覚の弱い方

肌を傷付ける原因となります。



傷・湿疹・ほくろ・あざ・いぼ・吹出物がある部位には使用しない。

肌を傷付ける原因となります。

落としたり、ぶついたりしない。

故障の原因となります。

業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。

連続過負荷による故障の恐れがあります。

## ⚠ 注意

**通電したまま放置しない。**  
事故・トラブルの原因となります。

**アタッチメントを取りはずした状態で電源を入れない。**  
事故・けがの恐れがあります。

**お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。**  
ひび割れ・引火の恐れがあります。



**ローラー部を強く押さえない。**  
けがの原因となります。

**ローラー部を肌に強く押し付けない。**  
肌を傷付ける原因となります。

**1回の使用で同じ箇所に2～3秒以上当て続けたり、同じ箇所に連続で使用しない。**  
肌を傷付ける原因となります。

**家族や他人と共用しない。**  
感染症を広げる恐れがあります。



**水をかけたり、水につけたりしない。(アタッチメントは取りはずして洗浄可能) また、ぬれた手で使用しない。**  
ショート・故障の原因となります。




**浴室や湿気の多い場所に保管しない。**  
故障の原因となります。

# 各部のなまえ

## 本体

ローラー部

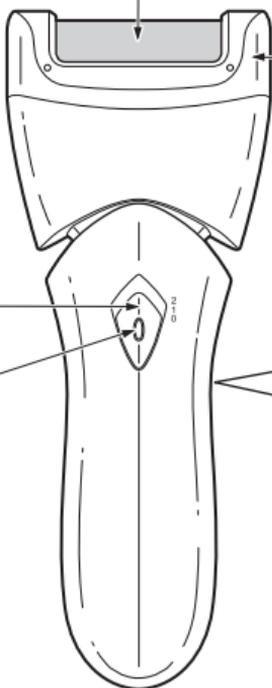


アタッチメント (細目)<sup>\*</sup>

<ローラー色: ライトグレー>

梱包時は本体に取り付けられています。

## 背面

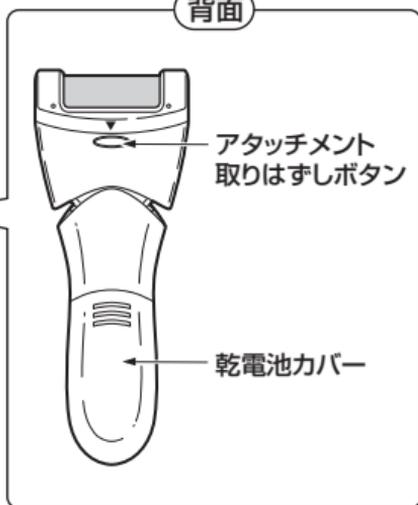

ロック付スイッチ  
(2/1/0)


ロックボタン

アタッチメント  
取りはずしボタン

乾電池カバー

アタッチメント (粗目)<sup>\*</sup>

<ローラー色: グレー>

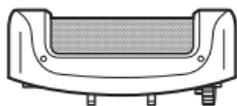

ヘッドカバー<sup>\*</sup>



梱包時はアタッチメント (粗目) に  
取り付けられています。

掃除用ブラシ<sup>\*</sup>



名称の横に<sup>\*</sup>が付いているものは付属品です。

# アタッチメントの着脱のしかた

- 本機には粗目<ローラー色：グレー>と細目<ローラー色：ライトグレー>の、2つのアタッチメントが付属されています。

肌の状態に合わせてアタッチメントを選び、使い分けてください。


※梱包時は細目<ローラー色：ライトグレー>が取り付けられています。

- ・粗目<ローラー色：グレー>=厚く固くなった角質のお手入れに。
- ・細目<ローラー色：ライトグレー>=仕上げや細かい部分のお手入れに。

- 必ずロック付スイッチを「0」にしてから行ってください。


## ＊取り付けかた

アタッチメントの▼印と本体のアタッチメント取りはずしボタンを合わせ、「カチッ」と音が鳴るまでしっかり押し込みます。

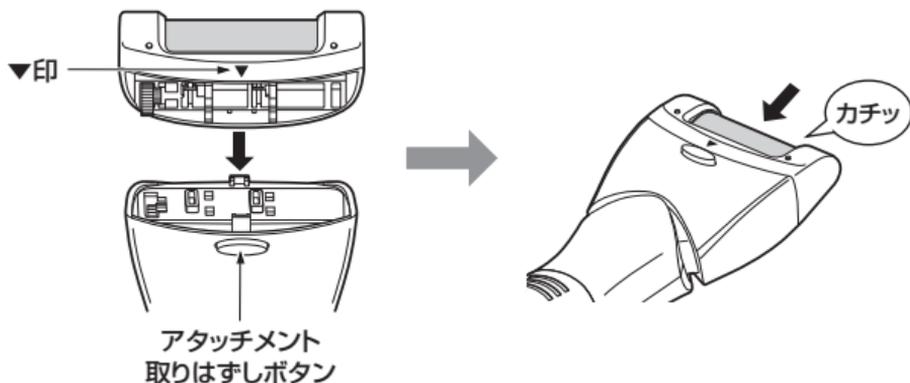

## ＊取りはずしかた

アタッチメント取りはずしボタンを押しながら、アタッチメントを矢印の方向に引き抜きます。

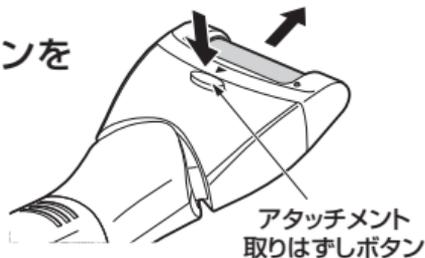

# 【アフターサービスについて】

## 1 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 2 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理いたします。

## 3 補修用性能部品の保有期間

- 角質ケアの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

## お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

## 【保証・無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3. **ご購入、ご購入等**で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
  - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
  - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ) 本書のご提示がない場合。
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
  - (ト) 譲渡、転売、リサイクル店（中古品）、中古販売店、オークション等により入手された場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。日本国外からの修理依頼や補修用部品・消耗部品の発送依頼には対応しておりません。  
Effective only in Japan. We do not offer repair service or dispatch maintenance parts or consumables internationally.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

### 修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

# 角質ケア 保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。  
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買  
上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	KLC-0342		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理 保証期間	対象部分	期間（お買い上げ日より）	
	本体	1年	
お客様	お名前	様	
	ご住所 〒		
販売店	店名・住所・電話		

見<sub>EL</sub>本

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。  
小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6268)1423

## お客様相談窓口

製品のお問い合わせ、修理に関するご相談、  
部品の購入に関するご相談は



ナビダイヤル  
(全国共通番号)

**0570 (07) 5555**

※ナビダイヤルが  
ご利用いただけない場合

**TEL. 03 (3570) 6730**

受付時間：平日 9：00～17：00  
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)


**小泉成器株式会社**

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

# 乾電池の入れかた


●必ずロック付スイッチを「0」にしてから行ってください。

- 1 ≡部を押しながら  
乾電池カバーを矢印の方向に  
引きはずします。

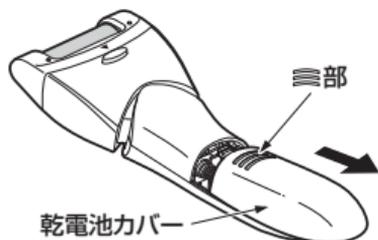

- 2 乾電池ケースの内側の表示に合わせて乾電池を入れ、  
乾電池カバーをスライドさせて取り付けます。

※バネは片方のみが付いています。

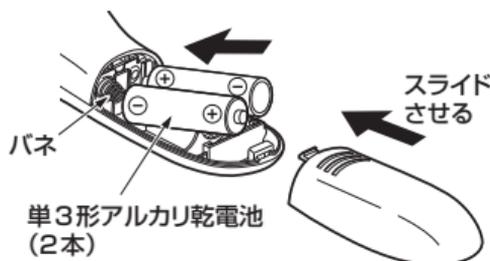

## 電池寿命(目安)

●単3形アルカリ乾電池2本で1回10分間使用の場合、約12回使用できます。

※お手入れ状態や周囲温度など使用条件によって異なります。

※ローラーの回転が弱くなったときは、新しい単3形アルカリ乾電池(2本)と交換してください。

## ▲ 乾電池の取り扱いに関する注意

以下のことを守ってください。乾電池の発熱・破裂・破損・液漏れによるけや周囲汚損の原因となります。

- アルカリ乾電池(単3形)以外は使用しない。
- 使い切った乾電池は、すぐ取り出し、分別廃棄する。
- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- 長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する。
- 新しい乾電池と古い乾電池または異なった種類の乾電池を混ぜて使用しない。
- 火の中に捨てない。

# 正しい使いかた

## ⚠ 注意

- 足うらやかかと、足の指のお手入れ以外に使用しない。  
体の他の部位には絶対に使用しないでください。けが・故障の原因となります。
- ご使用前に必ずアタッチメントの状態（変形・破損・取り付け状態など）を確認する。  
肌を傷付ける原因となります。
- 必ず肌が乾いた状態で使用する。  
肌を傷付ける原因となります。
- 傷・湿疹・ほくろ・あざ・いぼ・吹出物がある部位には使用しない。  
肌を傷付ける原因となります。


## 準備

- ・ 肌を清潔な状態にし、完全に乾かします。
- ・ 削った角質が飛び散ることがあるため、紙などを敷きます。

**1** 肌の状態に合わせてアタッチメントを選び、本体に取り付けます。(P. 6参照)

**2** ロックボタンを押しながら  
ロック付スイッチを上へスライドします。

- ・ ローラーが回転します。
- ・ お好みに合わせて、回転のスピードを使い分けてください。  
2：速い回転  
1：ややゆっくりとした回転  
0：電源切

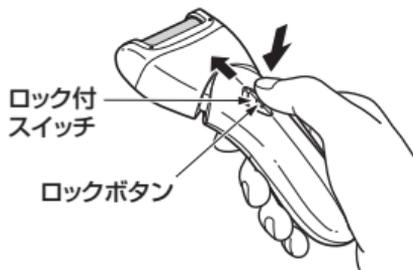

**3** ローラー部を軽く肌当て、  
当てる箇所を少しずつ変えながら  
動かします。

- ・ 肌がヒリヒリしたり熱くなったら、直ちに使用を中止してください。



# 正しい使いかた

## ⚠ 注意

- ローラー部を肌に強く押し付けない。  
肌を傷付ける原因となります。
- 1回の使用で同じ箇所に2～3秒以上当て続けたり、同じ箇所に連続で使用しない。  
肌を傷付ける原因となります。

## 使用後

ロック付スイッチを下にスライドして「0」にし、電源を切ります。


# 上手な使いかた

## ✳ 使用時間の目安

2週間に1回程度、1回に約10分以内のご使用をおすすめします。

## ✳ 上手な動かしかた ※必ず肌が乾いた状態でご使用ください。

### ✳ 足の裏

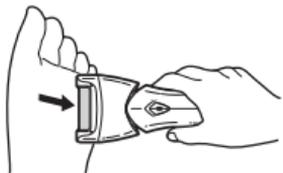

### ✳ かかと



### ✳ 足の指



**Point 1** 粗目<ローラー色：グレー>のアタッチメントで厚くなった角質を削った後、  
細目<ローラー色：ライトグレー>のアタッチメントで削ると、よりキレイに仕上がります。

**Point 2** お手入れの後は保湿剤などを塗り、肌の乾燥を防いでください。

# お手入れと保管のしかた

●必ずロック付スイッチを「0」にしてから、お手入れ・保管してください。

## ⚠ 注意

- ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。  
ひび割れ・引火の恐れがあります。
- ローラー部を強く押さない。  
けがの原因となります。

## ＊お手入れ

### 本体

本体の汚れは、乾いた布で拭き取ってください。  
アタッチメント取付部に角質のクズが付いているときは、  
付属の掃除用ブラシで取り除いてください。

## ⚠ 注意

本体を水洗いしない。  
ショート・故障の原因となりますので、  
絶対におやめください。



### アタッチメント

※アタッチメントを本体に取り付けたまま洗わないでください。

- ①アタッチメントを本体から取りはずします。  
(P. 6 参照)
- ②付属の掃除用ブラシで角質のクズを取り除きます。
- ③水またはぬるま湯 (40℃以下) で、洗浄します。
- ④乾いたやわらかい布で水気を拭き取り、乾燥させてから、本体に確実に取り付けます。



## ＊保管

- ヘッドカバーを取り付けて保管してください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 浴室など、湿気の多い場所や、直射日光の当たる場所は避けてください。

# 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に以下の点をお調べください。

こんな場合	点 検	処置のしかた
ロック付スイッチを入れても動かない。	乾電池は正しい方向で入っていますか？	乾電池の＋－を確かめてください。 (P. 10参照)
	乾電池が消耗していませんか？	新しい乾電池と交換してください。
削りにくくなった。	角質のクズなどがたまっていますか？	お手入れをしてください。 (P. 13参照)
	アタッチメントのローラー部分が消耗していませんか？	新しいアタッチメントに交換してください。 (P. 15参照)

## ★長年ご使用の角質ケアの点検を！

### 愛情点検



ご使用の際このようなことはありませんか？

- スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- 運転中に異常な音がある。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中 止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、必ず販売店にご相談ください。

# 仕様

電 源	DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本 (別売)
本 体 寸 法	約62 (W) × 40 (D) × 163 (H) mm (ヘッドカバー装着時)
質 量	約105g(アタッチメント(細目)・ヘッドカバー装着時、乾電池含まず)
連続使用時間	約120分
付 属 品	アタッチメント(粗目)、アタッチメント(細目)、ヘッドカバー、掃除用ブラシ

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

## 消耗部品について

アタッチメントは消耗部品です。消耗部品を依頼される場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

名 称	型 番
アタッチメント ・(粗目)〈ローラー色：グレー〉 ・(細目)〈ローラー色：ライトグレー〉 } 各1個入	KLC-A013

※アタッチメントが破損した場合や、効果が弱くなったと感じられたら交換時期となります。