

超音波美顔器

型番 KBE-1110

家庭用



<http://www.bijouna.jp/>



Bijouna

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

保証書
別添

このたびはビジョーナ 超音波美顔器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、保証書が別途添付されています。お読みになられたあとも、保証書とともにお使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

小泉成器株式会社

安全上のご注意

*ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

-  **危険** 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じるもの
-  **警告** 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの
-  **注意** 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示の例

-  〇記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
-  ●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

*お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 危険



- 下記のような医療用電気機器をお使いの方は絶対に使用しない。
 - ・ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器
 - ・人工心肺などの生命維持用医療用電子機器
 - ・心電計などの装着型の医療用電子機器
- 医療用電子機器の誤作動をまねく恐れがあります。

⚠ 警告



- 改造はしない。また修理技術者以外の人は、修理をしない。
 - 廃棄するとき以外は、分解しない。
- 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「サービスセンター」にご相談ください。



- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。
- 感電・けがの原因となります。
- 風呂、シャワー室での使用や水洗い掃除を絶対にしない。
- 感電・発火・ショートの原因となります。



警告



● 次のような方は、使用しない。

- ・心臓に障害のある人
 - ・急性疾患の人
 - ・有熱性疾患の人
 - ・血圧異常の人
 - ・感染性疾患の人
 - ・結核性疾患の人
 - ・悪性腫瘍の人
 - ・顔面神経痛の人
 - ・妊娠中の人
 - ・生理中の人
 - ・アトピー性皮膚炎の人
 - ・アレルギー体質の人
 - ・特に肌が敏感な人
 - ・血友病疾患の人
 - ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
 - ・飲酒や薬を服用中の人・過度の日焼け直後で赤くヒリヒリし、炎症を起こしている人
 - ・健康が特にすぐれない人、疲労が激しい人
 - ・化学繊維でかぶれた経験のある人
- 事故やトラブルの恐れがあります。

● 下記の部位には、使用しない。

- ・整形手術をした部位
 - ・眼球および上まぶた
 - ・傷口
 - ・顔面黒皮症
 - ・口の中など粘膜の部位
 - ・ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位・感覚、知覚障害を起こしている部位
 - ・皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部位
 - ・カユミやホテリ、物理的刺激による病的なシミのある部位
 - ・過度の日焼けで炎症を起こしている部位
 - ・化粧品などで皮膚炎を起こしている部位
- 事故や肌のトラブルの恐れがあります。

● 水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電の原因となります。

● ACアダプターのコードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない。

感電・発火・ショートの原因となります。

警告



●電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

●プラグにピンやごみを付着させない。
感電・発火・ショートの原因となります。

●専用のACアダプターで、他の商品を使用したり、充電したりしない。また、専用のACアダプター以外での使用はしない。
異常発熱による発火・ショートの原因となります。

●ACアダプターに電源コードを巻きつけない。
電源コードが断線し、火災・感電の原因となります。



●ACアダプターは、浴室や湿気の多いところでは使わない。保管しない。
感電・発火・ショートの原因となります。



●充電終了後は必ずACアダプターをコンセントから抜く。また、ACアダプターを接続したまま使ったときは、使用後に必ずスイッチを切ってからACアダプターをコンセントから抜く。
火災・感電の原因となります。



●必ず交流100-240Vで使用する。
火災・感電の原因となります。

●使用中痛みや不調を感じたときや、使用后肌に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談する。
事故や体調不良、肌のトラブルなどの原因となります。

注意

- 落としたり、ぶつけたりしない。
感電・発火の原因となります。



- 顔のお手入れ以外の目的では使用しない。
事故やトラブルにつながる恐れがあります。

- お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。
ひび割れ、感電、引火の恐れがあります。

- 肌に傷や炎症がある場合は絶対に使用しない。
肌のトラブルや痛みの原因となります。

- 脱毛・剃毛処理した当日は同部位への使用はしない。
腫れたり、赤みが出る恐れがあります。

- 規定時間以上の使用はしない。
肌のトラブルの原因となります。

- ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない。
感電・ショート・発火の原因となります。

- ご使用前に、ヘッドに傷がないか確認する。
肌を傷つける原因となります。



注意

- 使いはじめの方や敏感肌の方は使用時間を短めにして、お肌の様子を見ながら使用してください。
事故や肌荒れなどのトラブルの原因となります。

- イヤリングやネックレスなどのアクセサリ、コンタクトレンズは、外して使用する。
事故やトラブルの原因となります。



- ひどい肌荒れや皮フ表面に凹凸がある場合またはうぶ毛やヒゲなどによって、まれに刺激を強く感じる場合があります。
その際には、その部位への使用を控える。
事故やトラブルの原因となります。

- コットンやヘッドは肌の同一部位に留めず移動させて使用する。
肌のトラブルや体調不良の原因となります。

- ACアダプターのほこりなどは定期的に取り除く。
プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因となります。



- ACアダプターを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のACアダプターを持って引き抜く。
感電・発火・ショートの原因となります。

- 使用時以外は、ACアダプターをコンセントから抜く。
けがや、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。

海外使用の手引き

- 当商品は「AC100-240V」の地域で使用できます。
- ご使用前に、使用する国の電源コンセントの形状を確認してください。
- ※世界の電圧とプラグの一覧は、8ページに掲載しています。
- 当商品をAタイプ適用外の国でご使用の際は、使用する国の電源コンセントにあった接続プラグをご用意ください。

Aタイプ	Bタイプ	B3タイプ
商品のプラグ形状 ※そのまま使用できます。 	 	 
BFタイプ	Cタイプ	Oタイプ
 	 	 
O2タイプ	SEタイプ	注) 国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、現地でご確認ください。 また、電圧・プラグの一覧に記載していない国は、プラグアダプターが異なりますので、現地のホテルなどに確かめください。
 	 	

BEFORE USE

1. Before using, please check the voltage and type of plug at your location.
(ご使用前に、使用する国の電圧およびプラグの形状を確認してください。)
2. Before using, please confirm the shape of the plug socket, and choose the A plug or C plug adaptor.
(ご使用前に、電源コンセントの形状を確認して、接続プラグを選んでください。)
3. Before using, be sure to check the voltage and type of plug, because the voltage and the type of plug, may differ according to the area even in the same country.
(国によっては同一国内でも地域によって電圧プラグ形状が異なる場合がありますので、ご使用前に、電圧・プラグ形状を充分確認してください。)

世界の電圧とプラグ

地域・国名	Area / Countries	電圧 Voltage	プラグ Plug	地域・国名	Area / Countries	電圧 Voltage	プラグ Plug
アフガニスタン	Afghanistan	230	B, B3, C, SE	フィンランド	Finland	120/230	A, B, C, SE
インド	India	115/230/240	B3, BF, C, SE	フランス	France	127/230	A, C, O, SE
インドネシア	Indonesia	127/220/230	A, B, B3, BF, C, SE	ブルガリア	Bulgaria	110/220	A, C, SE
カンボジア	Cambodia	120/220	A, C	ベルギー	Belgium	127/230	A, B, C, SE
カンボディール	Kampuchea	115/230	A, B, B3, BF, C	ポーランド	Poland	230	B3, BF, C
スリランカ	Sri Lanka	230	B, B3, BF, C	ポルトガル	Portugal	230	B, B3, BF, C, SE
タイ	Thailand	110/220	A, B, B3, BF, C	マルタ	Malta	240	B3, BF, C
台湾	Taiwan	110/220	A, C, O	マダガスカル	Madagascar	127/220	A, C
韓国	Korea	110/220	A, C, SE	モナコ	Monaco	220	A, B, C, SE
北朝鮮	PRK	110/200/220	A, B, B3, BF, C, O, SE	ユーゴスラビア	Yugoslavia	127/220	A, C, SE
中国	China, Rep.	110/220	A, B, B3, BF, C, O, O2, SE	ルーマニア	Romania	220	C, SE
日本	Japan	100	A, B, B3, BF, C	ルクセンブルグ	Luxembourg	127/220	A, C, SE
Nepal	Nepal	115/220	A, B, B3, BF, C, SE	ボスニア	Bosnia	220	C, SE
バングラディッシュ	Bangladesh	230	B, B3, C	クロアチア	Croatia	220	C, SE
バングラ	Bangladesh	110/220	A, B, B3, BF, C	マケドニア	Macedonia	220	C, SE
パキスタン	Pakistan	110/230	A, B, B3, C	モルドバ	Moldova	127/220	A, C, SE
ミャンマー	Myanmar	230	B, B3, BF, C, SE	ラトビア	Latvia	127/220	A, C, SE
フィリピン	Philippines	120/230/240	A, B, B3, C, O	オーストラリア	Australia	240/250	A, BF, O
ブータン	Bhutan	230	C	グアム	Guam	120/240	A, BF, O
ブルネ	Brunei	240	B3, BF	サイパン	Saipan	110	A, C
ベトナム	Vietnam	110/220	A, BF, C, SE	サイロン	Sri Lanka	240	B, B3, O
ホンコン	Hong Kong	200/220	B, B3, BF, C	チベット	Tibet	110/220	A, C
マカオ	Macao	115/127/220	A, B, B3, BF, C, SE	トンガ	Tonga	240	O
マレーシア	Malaysia	240	B, B3, BF, C, SE	ニューカレドニア	New Caledonia	220	B, B3, C, O, SE
モンゴ	Mongol	230	C, SE	ニュージーランド	New Zealand	230/240	A, BF, O
ラオス	Laos	220	C, SE	パプアニューギニア	Papua New Guinea	240	A, BF, O
アメリカ	U.S.A	120	A	フィジー	Fiji	120/240	A, B, C, O
ハワイ	Hawaii	120	A	アラブ首長国連邦	United Arab Emirates	230/240	B3, BF, C
カナダ	Canada	120/240	A, BF	イエメン(民主人民共和国)	Yemen	230	B3, BF, C
テキサス	Texas	240	BF, C, O, SE	イスラエル	Israel	230	B3, BF, C
アルゼンチン	Argentina	230	BF, C, O, SE	イタ	Italy	230	B3, BF, C
ウルグワイ	Uruguay	220	B3, BF, C	イラン	Iran	230	BF, C, SE
エクアドル	Ecuador	115/120/220	A, B3, C, O	オマーン	Oman	230	B, B3, BF, C
エル・サルビドル	El Salvador	110/220	A, B3, BF	カタール	Qatar	240	BF, C
キューバ	Cuba	110/220	A, BF, C	キプロス	Cyprus	240	B3, BF, C
グアテマラ	Guatemala	120/240	A, BF, C	クウェイト	Kuwait	240	B, B3, SE, C
コスタ・リカ	Costa Rica	120/240	A, BF, C, O, SE	サウジアラビア	Saudi Arabia	127/220	A, B, B3, BF, C, SE
コロンビア	Colombia	100/150	A, B3, C	シリア	Syria	220	B3, BF, C
ジャマイカ	Jamaica	110/220	A, B3, BF, C	トルコ	Turkey	220	B, B3, SE, C
スリナム	Surinam	127/220	A, C, SE	バーレーン	Bahrain	110/220/230	A, BF
チリ	Chile	220	B3, BF, BF, C, SE	ヨルダン	Jordan	230	B3, BF
ドミニカ共和国	Dominican Rep.	110/220	A, BF, C	レバノン	Lebanon	110/220	A, C
ニカラガ	Nicaragua	120/240	A, BF, C	エジプト・アラブ共和国	Arab Rep. of Egypt	230	B3, BF, C, SE
パナマ	Panama	110/220	A, BF, C	アルジェリア	Algeria	127/220	A, BF, C
バージン諸島	Virgin Is.	120/240	A, BF, C	アンゴラ	Angola	220	B, B3, C
バミューダ	Bermuda	115/120/230	A, BF	カンガ	Uganda	240	BF, C
バハマ	Bahamas	120/240	A, BF, C, SE	エクアドル	Ecuador	220	BF, C
パナマ	Panama	120/240	A, BF	カナリア諸島	Canary Is.	120/220	A, BF, C
パラグワイ	Paraguay	220	A, C, SE	カメルーン	Comeroon	220/220	A, BF, C
ブラジル	Brazil	127/220	A, C, SE	ガーナ	Ghana	230/250	B3, BF, C
ベネズエラ	Venezuela	120	A, C, SE	ギニア	Guinea	220	B3, BF, C
ペルー	Peru	120	A, C, SE	ケニア	Kenya	240	B, B3, BF, C
ボネラス	Bonaras	110	A, C, SE	コモロ諸島	Comoro Coast	220	B, B3, C
ボリビア	Bolivia	110/220	A, C, SE	コンゴ(民主共和国)	Congo	220	B, B3, C
メキシコ	Mexico	120/127/230	A, C, SE	ザイール	Zaire	220	C
アイスランド	Iceland	230	B, B3, BF, C, SE	ジンバブエ	Zimbabwe	240	B, B3, BF, C
アイスランド	Iceland	230	A, B, B3, BF, C, SE	スーダン	Sudan	220/240	B, B3, C
イギリス	England	230/240	B, B3, BF, C	ギニアビサウ	Guinea-Bissau	220	B, BF, C
イタリア	Italy	125/220	A, C, SE	セネガル	Senegal	127/220	A, B3, BF, C
オーストリア	Austria	230	B, C, SE, O, SE	ソマリア	Somalia	110/220/230	B3, BF, C
オランダ	Netherlands	230	B, C, SE	タンザニア	Tanzania	230	BF, C
ギリシア	Greece	230	B, B3, BF, C	中央アフリカ共和国	Central Africa	220	B, B3, SE, C
グリーンランド	Greenland	240	B, B3, BF, C	チュニジア	Tunisia	127/220	A, B, B3, BF, C, O, SE
ジブラルタル	Gibraltar	230/240	B, B3, SE, C	リビア	Libya	127/220	A, B3, BF, C
スイス	Switzerland	230	A, B, C, SE	ボツワナ	Botswana	220	B, B3, BF, C
スウェーデン	Sweden	230	A, B, C, SE	マダガスカル	Madagascar	100/220	A, B3, C
スペイン	Spain	127/220	A, C, SE	南アフリカ	South Africa Rep.	220/230/250	B, B3, BF, C, SE
ロシア(独逸)	Russia	127/220	A, B, C, SE	モーリタニア	Mauritania	220	C, SE
ロシア(独逸)	Russia/Spain	230	B, C, SE	モザンビーク	Mozambique	220	B, B3, BF, C
デンマーク	Denmark	230	C	モロッコ	Morocco	115/127/220	A, C, SE
ドイツ	Germany	127/230	A, C, SE	リビア	Libya	127/230	A, B3, C
ポーランド	Poland	230	C, SE	リビア(アラブ)	Libia Arab	120/240	A, B3, C, SE
ルワンダ	Rwanda	220	A, C, SE	スワズランド	Swaziland	110/220	A, B, C, SE

※同じ国でも地域によって電圧やプラグの形が定めてあり、また異なる場合もあります。事前に両地のホテルや旅行代理店でご確認のうえ、ご使用ください。

各部のなまえ

KBE-1110

本体

コットンカバー
コットンをセットします。

モードボタン (M)
(クレンジング/超音波/保湿ケア)

充電ランプ

ヘッド
(チタンコーティング)
※ご使用前に保護シールをはがしてください。

アース (側面)
この部分を素手で持って (触れて) 使用してください。


表示部

強弱/振動切換えボタン (◀▶)

入切/HOTボタン




アース

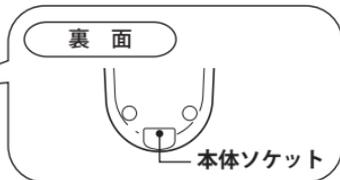

裏面

本体ソケット

ACアダプター (KTH-9005)

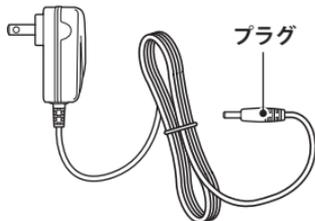

プラグ

付属品

専用ジェル (お試しサイズ〈内容量30g〉)



※専用ジェル KBE-C005 (内容量120g) は別売です。

初めてご使用になるとき

皮フ試験 (パッチテスト)

肌のトラブルを防止するため、事前にチェックしてください。

1 腕の内側を石けんで洗い、タオルなどで水分をふき取ります。

2 洗ったところに専用化粧品を塗り、48時間放置します。
・10円硬貨サイズ大に薄く塗り、自然乾燥させます。
・塗ったところを水でぬらしたり、こすったりしないでください。



注意 塗布部に発疹・発赤・かゆみ・刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止して洗い流してください。

48時間後

肌に異常がなければ、使用できます。

※皮フ試験 (パッチテスト) の結果、異常が生じた場合は、本機で専用化粧品を使用しないでください。

【仕様】

■本体

電源方式	充電・交流式 (専用ACアダプター使用)
電源	AC100-240V・50/60Hz
消費電力	2.5W (充電時)、2.5W (交流使用時)
寸法	約47 (W) ×47 (D) ×153 (H) mm
質量	約96g
充電時間	約3時間
超音波数	3MHz
付属品	専用ジェル (お試しサイズ (内容量30g))

■ACアダプター (KTH-9005)

入力	AC100-240V・50/60Hz
出力	DC5.0V 1.0A
コード長	約1.8m
プラグ形状	--C+

※専用ジェル KBE-C005 (内容量120g)
※専用美容液 KBE-C006 (内容量30mℓ)
※専用化粧水 KBE-C007 (内容量120mℓ) } は別売です。

充電のしかた

本機は充電・交流式です。

ACアダプターを接続したまま使用することができます。

購入後初めて使用する場合や長期間使用しなかった場合は、約3時間充電してください。


1 本体ソケットにプラグを差し込みます。

お願い

- ・充電の際は、必ず電源を切ってください。

2 コンセントにACアダプターを差し込みます。

(充電中は充電ランプが点灯します。)

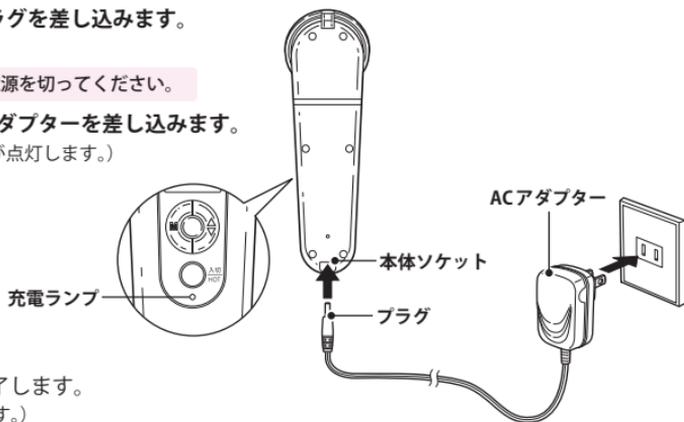

充電の目安

- 約3時間で充電が完了します。
(充電ランプが消灯します。)

お願い

- ・充電・ご使用中は、本体・ACアダプターが多少熱くなりますが、異常ではありません。
- ・本機専用のACアダプター以外では充電しないでください。

充電終了後

コンセントからACアダプターを抜き、本体ソケットからプラグを取り外します。

ご使用になる前に

⚠ 警告

使用中痛みや不調を感じたときや、使用后肌に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談する。
事故や体調不良、肌のトラブルなどの原因となります。

⚠ 注意

肌に傷や炎症がある場合は絶対に使用しない。
肌のトラブルや痛みの原因となります。

イヤリングやピアス、ネックレスなどのアクセサリー、コンタクトレンズは外して使用する。
事故やトラブルの原因となります。

上手な使いかた

※使用頻度・使用時間を必ず守ってください。

Step

1

クレンジング・・・1日1回、1回に約5分のトリートメント
通常の洗顔では落としきれない微細な汚れを落とします。

Step

2

超音波・・・週2～3回、1回に約10分のトリートメント
1秒間に約300万回の超音波を肌に伝えることにより、肌の弾力を高め、
フェイスラインを引き締めます。

Step

3

保湿ケア・・・週2～3回、1回に約5分のトリートメント
美容液の美容成分を皮膚の角質層まで浸透させます。

+

HOT 各モードに「温め」の機能を付け加えます。

トリートメント前の準備

・洗顔をして、メイク、皮脂、
汚れなどを落として、肌を清
潔な状態にします。



・身につけているアクセサリー類、
貴金属類は外します。





クレンジング (1日1回・約5分)

使用頻度 1回の使用時間

自動電源OFF - 約5分

1 コットンにヘッドをセットします。

- ・コットンをヘッドに置き、コットンカバーでしっかりと固定します。



2 コットンに化粧水を含ませます。




- ・化粧水は本機専用の化粧水 KBE-C007 (内容量120mℓ) (別売) をご使用ください。
- ・コットンからたれない程度に含ませてください。(ヘッドがうすく透けて見える程度)



3 電源を入れて、「クレンジング」モードを選択します。

- ①「入切/HOT ボタン」を長押しして、電源を入れます。
(電源を入れると同時に「クレンジング」モードが選択されています。)

- ②「強弱/振動切換えボタン(◊)」で、出力レベルを選択します。

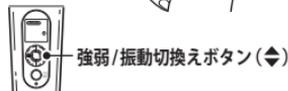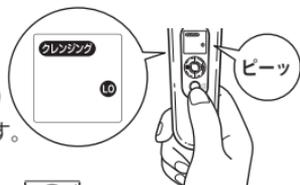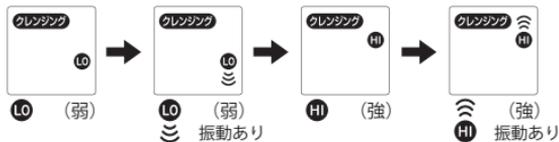

- + 「入切/HOT ボタン」を1回押すと、ヘッドがじんわりとあたたかくなります。



4 トリートメントをはじめます。

①本体のアースに素手が触れるように握ります。


お願い

- ・ご使用中、本体のアースが素手に触れていないと、クレンジングができません。必ず左右いずれかのアースに素手が触れるよう本体を握ってください。

②ヘッドを肌に軽く押し当て、顔の中心から外側へゆくりと動かします。

お願い

- ・1日1回、5分を超える連続使用はおやめください。肌のトラブルの原因となります。
- ・ヘッドは肌の同一部に留めず、移動させてご使用ください。肌のトラブル、体調不良などの原因となります。
- ・コットンの水分がなくなったり、すべりづらい場合は、化粧水を追加してください。

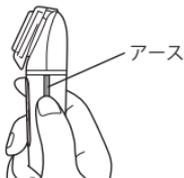

- ①頬を下から上へ ④小鼻のわきを上から下へ
②鼻筋を下から上へ ⑤鼻の下を上から下へ
③頬を中心から外側へ ⑥あごを上から下へ



- ・クレンジングのトリートメントは、1日1回5分以内です。約5分経過すると、自動停止し、表示が減滅します。

使用後

5 ①「入切/HOTボタン」を長押しして、電源を切ります。

②コットンカバーを開いて、コットンを外します。

- ・コットンを外し、ヘッドやコットンカバーなど、本体についた化粧水を、やわらかい布やティッシュなどで拭き取ってください。

お願い

- ・連続使用はしないでください。肌負担がかかり、肌のトラブルの原因となります。
- ・一度使用したコットンは再使用しないでください。肌トラブルの原因となります。



※「クレンジング」トリートメント終了後、「超音波」保湿ケアトリートメントをおこなわない場合は、化粧水や美容液などで肌を整えるなど、普段通りお手入れをしてください。

※続けて「超音波」保湿ケアトリートメントに進む場合は、専用化粧水 KBE-C007 (内容量 120mℓ) (別売) で肌を整えてからおこなってください。



超音波 (週2~3回・約10分)

使用頻度

1回の使用時間

自動電源OFF ー約10分

- 1** ヘッドの上にジェルをサクランゴ大程度のせます。
 ・ジェルは本機専用のジェル KBE-C005 (内容量120g) (別売) をご使用ください。
 ※この商品には、本機専用のジェル (お試しサイズ (内容量30g)) が付属されています。

- 2** 電源を入れて、「超音波」モードを選択します。
 ①「入切/HOTボタン」を長押しして、電源を入れます。
 ②「モードボタン(M)」で、「超音波」モードを選択します。

- 3** トリートメントをはじめます。
 ①本体のアースに素手が触れるように握ります。

お願い

・ご使用中、本体のアースに素手が触れていないと、超音波トリートメントができません。必ず左右いずれかのアースに素手が触れるよう本体を握ってください。

- ②ヘッドを肌に軽く押し当て、ゆっくりと動かします。

お願い

- ・週2~3回、1回に10分を超える連続使用はおやめください。肌のトラブルの原因となります。
- ・ヘッドは肌の同一部に留めず、移動させてご使用ください。肌のトラブル、体調不良などの原因となります。
- ・ヘッドがすべりにくい場合は、ジェルを追加してください。

使用後

- 4** 「入切/HOTボタン」を長押しして、電源を切ります。
 ・ヘッドやコットンカバーなど、本体についたジェルをやわらかい布やティッシュなどで拭き取ってください。

お願い

・連続使用はしないでください。肌に負担がかかり、肌のトラブルの原因となります。

※肌に残ったジェルは、肌になじませてください。



※ヘッドは振動しません。



- ①額を下から上へ
- ②あごからフェイスラインへ
- ③あごからこめかみへ
- ④鼻下からこめかみや
- ⑤口元從小鼻へ (ほうれいせん)
- ⑥鼻横からこめかみへ

・超音波のトリートメントは、週2~3回、1回に10分以内です。
 約10分経過すると、自動停止し、表示が点滅します。





保湿ケア (週2~3回・約5分)

使用頻度

1回の使用時間

自動電源OFF ー約5分

1 美容液を顔全体にまんべんなくつけます。


・美容液は本機専用の美容液 KBE-C006 (内容量30ml) (別売) をご使用ください。

2 電源を入れて、「保湿ケアモード」を選択します。

①「入切/HOT ボタン」を長押しして、電源を入れます。

②「モードボタン(M)」で、「保湿ケア」モードを選択します。

③「強弱/振動切換えボタン(◊)」で、出力レベルを選択します。

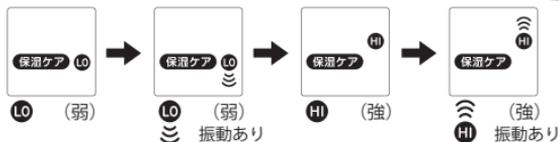

「入切/HOT ボタン」を1回押すと、ヘッドがじんわりとあたたかくなります。

3 トリートメントをはじめます。

①本体のアースに素手が触れるように握ります。

お願い

・ご使用中、本体のアースに素手が触れていないと、保湿ケアトリートメントができません。必ず左右いずれかのアースに素手が触れるよう本体を握ってください。

②ヘッドを肌に軽く押し当て、ゆっくりと動かします。

お願い

- ・週2~3回、1回に5分を超える連続使用はおやめください。肌のトラブルの原因となります。
- ・ヘッドは肌の同一部に留めず、移動させてご使用ください。肌のトラブル、体調不良などの原因となります。
- ・ヘッドがすべりにくい場合は、美容液を追加してください。



・保湿ケアのトリートメントは、週2~3回、1回に5分以内です。約5分経過すると、自動停止し、表示が点滅します。

保湿ケア

使用後

4 「入切/HOTボタン」を長押しして、電源を切ります。

- ・ヘッドやコットンカバーなど、本体についた美容液をやわらかい布やティッシュなどで拭き取ってください。

お願い

- ・連続使用はしないでください。肌に負担がかかり、肌のトラブルの原因となります。



お手入れと保管のしかた

電源が切れていることを確認してください。

本体 本体の汚れは、やわらかい布やティッシュなどで拭き取ります。

ヘッド・コットンカバー

こびりついたジェルや汚れは、水分を含ませて固くしぼった布で拭き取ります。



注意

本体の水洗いはできません。

感電・故障の原因となりますので、絶対におやめください。

シンナー・ベンジン・アルコールなどは絶対に使用しないでください。

変質・変色の恐れがあります。

保管のしかた

お子様の手の届かない所、湿気やホコリの少ない所に保管します。

注意

浴室などの水のかかる所や、湿気の多い所に放置しないでください。

故障の原因となります。

直射日光の当たるところ、熱器具の近くに放置しないでください。

変形・変色・故障の原因となります。

故障かなと思ったら

以下の点をお調べください。

症 状	チェックポイント	処置のしかた
電源を入れても表示が点灯しない。	充電されていますか？	約3時間充電してください。 (P. 11参照)
表示が点滅する。	自動電源OFF機能が働いたため で、故障ではありません。	「入切/HOTボタン」を長押しし て、電源を切ってください。
充電できない。	電源が「入」の状態になってい ませんか？	電源を切って、充電してください。
	プラグが本体ソケットから抜け ていませんか？	プラグを本体ソケットに確実に 差し込んでください。
	ACアダプターがコンセントか ら抜けていませんか？	ACアダプターをコンセントに 確実に差し込んでください。



Q&A よくある質問

お客様からよく寄せられるご質問を掲載しております。

Q 顔以外（体など）にも使っても良いですか？

A 顔専用です。顔以外には使用しないでください。

Q 1日に何度使っても大丈夫ですか？

A 以下の使用頻度・使用時間を守ってご使用ください。
・クレンジング：1日1回（約5分） ・超音波：週2～3回（1回に約10分） ・保湿ケア：週2～3回（1回に約5分）

Q 肌に「ピリピリ感」を感じるのですが…

A ・「クレンジング」モード時には、コットンに化粧水をつぎ足してください。
・「超音波」モード時にはジェル、「保湿ケア」モード時には美容液を追加してご使用ください。
それでも肌に違和感を感じる場合は、直ちにご使用を中止し、専門医にご相談ください。
そのままご使用を続けると、事故や体調不良、肌トラブルの原因となります。

●「クレンジング」モード

Q 「クレンジング」モードは、メイク落としに使うものですか？

A 「クレンジング」モード（または保湿ケアモード）でメイクを落とすことはできません。
洗顔をして、メイク、皮脂、汚れなどを落とし、肌を清潔な状態にした後、ご使用ください。

Q 専用化粧水の代わりに他の化粧水を使用しても良いですか？

A お手持ちの化粧水を使用していただくことは可能ですが、専用化粧水KBE-C007（内容量120mℓ）（別売）のご使用をおすすめします。

.....

Q コットンが取り付けできません？

A コットンのサイズが小さすぎたり、大きすぎたりしていませんか？
別のコットンをご使用ください。

●「超音波」モード

Q 必ずジェルをつけないといけないのですか？

A ジェルは、超音波を肌にスムーズに伝えるためのものです。
ジェルなしで使用されますと、肌に大きな負担がかかってしまいますので、専用ジェル
KBE-C005〈内容量120g〉(別売)をご使用ください。

Q ヘッドは振動しないのですか？

A 「超音波」モード時は、「強弱/振動切換えボタン」が使用できず、ヘッドは振動しません。

●「保湿ケア」モード

Q 専用美容液の代わりに、他の美容液を使用しても良いですか？

A お手持ちの美容液を使用していただくことは可能ですが、専用美容液 KBE-C006〈内容量30mℓ〉
(別売)のご使用をおすすめします。

製品を廃棄するとき



注意

- お客様による充電電池の修理、交換はできません。
- 廃棄するとき以外は、製品を分解しないでください。

充電電池リサイクルにご協力を



Li-ion


このマークの商品には、充電電池を使用しております。充電電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済の商品の廃棄に際しては、充電電池を取り出し、必ずプラスとマイナスの金属端子部にテープ等を貼って、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。

詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。

<http://www.jbrc.com>

廃棄する際の充電電池の取り出しかた

電源を「ON」にして、完全に動作しなくなるまで充電電池を放電させてからおこなってください。ドライバーを使い、①～⑥の手順で分解してください。

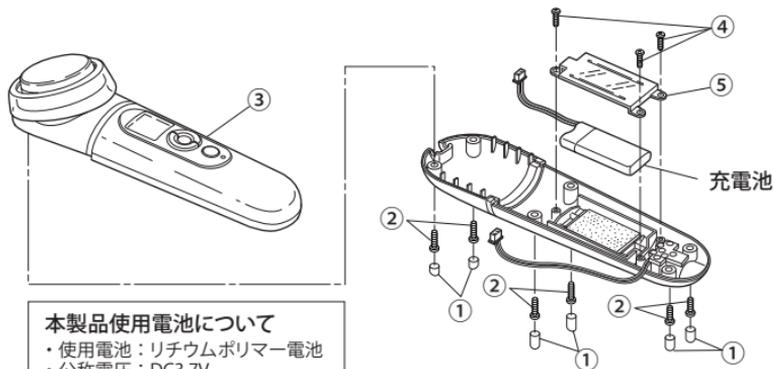

アフターサービスについて

1. 保証書

- 保証書は別途添付されています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は お買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- 超音波美顔器の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、保証書に記載の小泉成器株式会社「サービスセンター」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。

尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

■お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
 ナビダイヤル (全国共通番号) TEL. 0570 (07) 5555
TEL. 06 (6262) 3561
FAX. 06 (6268) 1432

■サービスセンター

・修理センター

この商品の修理に関するお問い合わせについては下記へお寄せください。

東日本修理センター 〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190
西日本修理センター 〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号

 ナビダイヤル (全国共通番号) TEL. 0570 (05) 8888

・部品センター

この商品の部品に関するお問い合わせについては下記へお寄せください。

部品センター 〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号

 ナビダイヤル (全国共通番号) TEL. 0570 (00) 3211

お客様相談窓口／サービスセンターの受付時間
平日9：00～17：30（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

2012年9月現在（所在地、電話番号などについては、変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）