

吸引&フェイスローラー

型番 KBE-1900

家庭用



Bijouna

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

保証書
別添

このたびはbijouna 吸引&フェイスローラーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、保証書が別途添付されています。お読みになられたあとも、保証書とともにお使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

<http://www.bijouna.jp/>

小泉成器株式会社

安全上のご注意

- *ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- *吸引機能では絶対に1ヶ所で静止させて吸引しないでください。カップが吸い付き離れにくくなり、紫斑ができる場合があります。
はじめてご使用の際は、目立たない部位（上腕部等）でタッピング（吸う→離す）の練習をしてください。
- *ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示の例



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください

警告



改造はしない。修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。
故障・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店または、小泉成器株式会社「サービスセンター」にご相談ください。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。
故障・けがの原因となります。



！ 注意

	落としたり、ぶつけたりしないでください。 故障の原因となります。	
	顔のお手入れ以外の目的では使用しないでください。 事故やトラブルにつながる恐れがあります。	
	使い終わった乾電池は火の中に捨てないでください。 けが、やけどの原因となります。	
	水につけないでください。また、浴室等、湿気の多いところで保管しないでください。 故障の原因となります。	
	気分が悪くなったり、肌に苦痛を感じた場合はすぐに使用を中止してください。 事故や体調不調の原因となります。	
	ワイドカップ、スポットカップは絶対に1ヶ所で静止させて使用しないでください。 肌に紫斑や傷などトラブルの原因となります。	
	次のような部位には使用しないでください。 ・傷、湿疹、ほくろ、あざ、いぼ、吹出物、炎症を起こしている部位 ・目のまわりや額の生え際等、肌のやわらかい部位 肌に紫斑や傷などトラブルの原因となります	
	髪の毛をたらしした状態で使用しないでください。 髪の毛が巻き込まれ、事故や異常動作によるけがの原因となります。	
	故意に強く当てるなど無理な力をかけて回転の動きを止め続けたりしないでください。 故障の原因となります。	

！ 注意



次のような方は、使用しないでください。

- ・アレルギー体質で皮膚の敏感な方
- ・過度の日焼け、吹出物、かぶれなど肌にトラブルのある方。
- ・化学繊維でかぶれた経験のある方



使用中も万一お肌にトラブルが生じた場合はご使用を中止してください。

お肌のトラブルはストレスや体質や内臓疾患、または化粧品なども原因として考えられますので、専門医にご相談ください。



お手入れと保管のしかた

- ・電源が切れていることを確認してください。




アタッチメント（フェイスローラー・ワイドカップ・スポットカップ）

- ・アタッチメントを本体から取り外して（P.8参照）、水洗いします。

！ 注意

- ・熱湯は使わない。
- ・アタッチメントを取り付けたまま洗わない。

- ・水洗い後、乾いたタオルや、やわらかい布で水気を拭き取ってください。

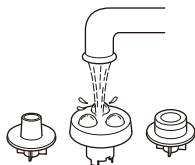

本体

- ・本体の汚れは、やわらかい布で拭き取ります。



！ 注意

シンナー・ベンジンは絶対に使用しないでください。

保管場所

- ・お子様の手の届かないところに保管してください。
- ・浴室等、湿気の多いところや直射日光の当たるところは避けてください。

【アフターサービスについて】

1 保証書

- 保証書は別途添付されています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 修理を依頼されるとき

- **保証期間中は**
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- **保証期間が過ぎているときは**
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

3 補修用性能部品の保有期間

- **吸引&フェイスローラーの補修用性能部品の保有期間**
は製造打切後5年です。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「サービスセンター」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

■ お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

小泉成器株式会社 本 社 〒 541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号



ナビダイヤル
(全国共通番号)

TEL. 0570 (07) 5555

TEL. 06 (6262) 3561

FAX. 06 (6268) 1432

■ サービスセンター

・ 修理センター

この商品の修理に関するお問い合わせについては下記へお寄せください。

東日本修理センター 〒 344-0127 埼玉県春日部市水角 1190

西日本修理センター 〒 559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号



ナビダイヤル
(全国共通番号)

TEL. 0570 (05) 8888

・ 部品センター

この商品の部品に関するお問い合わせについては下記へお寄せください。

部品センター 〒 559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号



ナビダイヤル
(全国共通番号)

TEL. 0570 (00) 3211

お客様相談窓口／サービスセンターの受付時間

平日 9：00～17：30

(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2012年9月現在（所在地、電話番号などについては、変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）

各部のなまえ

KBE-1900

本体

アタッチメント

フェイスローラー

アタッチメント

ワイドカップ




アタッチメント

スポットカップ



乾電池カバー

背面 モードスイッチ

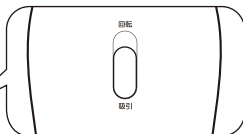

背面 メインスイッチ



●吸引 (High - Off - Low)
強 電源切 弱
2段階の吸引切り換えが
選べます。

●回転 (Right - Off - Left)
右回転 電源切 左回転
左右の回転方向が
選べます。
※回転スピードは左右で異なります。

【仕様】

電 源	DC3V 単4アルカリ乾電池2本 (別売)
本 体 寸 法	約 50 (W) × 53 (D) × 154 (H) mm (フェイスローラー装着時)
本 体 質 量	約 158g (フェイスローラー装着時・乾電池含まず)
アタッチメント	ワイドカップ、スポットカップ、フェイスローラー

電池寿命(目安)<フェイスローラー装着時>

単4アルカリ乾電池2本で1回5分使用の場合、約15回使用できます。
お手入れ状態や周囲温度など使用条件によって異なります。




乾電池の入れかた

1 メインスイッチを「Off」にします。

⚠ 注意

- ・本体が濡れているときは、よく拭いてください。

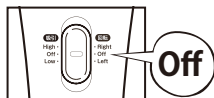


2 乾電池カバーを矢印の方向に回して外します。

3 乾電池ケースの内側の表示に合わせて乾電池を入れ、乾電池カバーを矢印の方向に回して取り付けます。

⚠ 注意

- ・プラス・マイナスの向きを間違えないでください。
- ・アルカリ乾電池以外は使用しないでください。
- ・吸引力やフェイスローラーの動きが弱くなったときは、新しい単4アルカリ乾電池（2本）と交換してください。

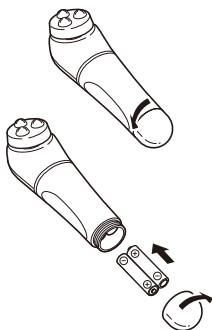

⚠ 電池の取り扱いに関する注意



以下のことを守ってください。乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。

- アルカリ乾電池（単4形）以外は使用しない。
- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- 乾電池は⊕ ⊖極を確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐ取り出し、分別廃棄する。
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する。
- 新しい乾電池と古い乾電池または異なった種類の乾電池を混ぜて使用しない。
- 火の中に捨てない。



フェイスローラーの使いかた

- 1 フェイスローラーを本体にセットします。
- 2 モードスイッチを「回転」にします。
- 3 メインスイッチを「Right (右)」または「Left (左)」にします。

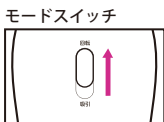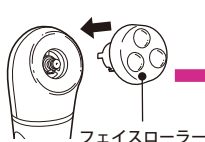

※回転スピードは左右で異なります。

上手な使いかた

Point 1

フェイスローラーを肌にあて、ゆっくりと動かしてお手入れします。
(使用時間(目安): 約5分)

Point 2

お手入れ後は、化粧水や美容液などで肌を整えるなど、普段通りのお手入れをしてください。




- ① 額から生え際に向かって
- ② 鼻の横からこめかみ
- ③ 口角の横から耳の中央
- ④ あごの真ん中から耳の下

使用後

メインスイッチを「Off」にします。

アタッチメントの着脱

取り外し

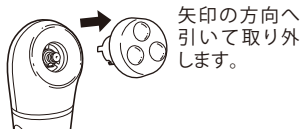

取り付け






ワイドカップ・スポットカップの 使いかた



- 1 ワイドカップまたはスポットカップを本体にセットします。
- 2 モードスイッチを「吸引」にします。
- 3 メインスイッチを「High (強)」または「Low (弱)」にします。

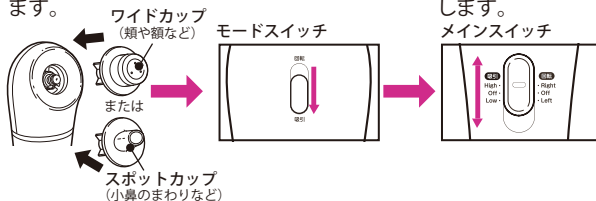

上手な使いかた

Point 1

カップを肌に軽くあて、手首をひねりタッピング (吸う→離す) を繰り返します。

Point 2

左右の小鼻の周り・気になるところをお手入れします。

Point 3

お手入れ後は、顔をすすぎ、化粧水や美容液などで肌を整えるなど、普段通りのお手入れをしてください。



お願い

- ・ご使用前は肌に乳液や美容クリームなどをつけないでください。また、洗顔後や入浴後など肌が柔らかい時は使用しないでください。肌に対する吸引力が増し、トラブルの原因となります。
- ・吸引時、1ヶ所で停止したり、長時間吸引しないでください。肌に紫斑ができたり傷がつくなどトラブルの原因となります。

使用後

メインスイッチを「Off」にします。