


KOIZUMI

家庭用

国内・海外両用

超音波ピーリング KBE-2710

保証書
別添

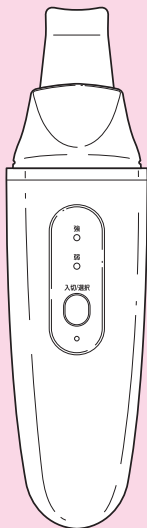

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

このたびはコイズミ 超音波ピーリングをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、保証書が別途添付されています。お読みになられたあとも、保証書とともにお使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

小泉成器株式会社



安全上のご注意

- *ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- *ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- | | | |
|--|-----------|--|
|  | 危険 | 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じるもの |
|  | 警告 | 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの |
|  | 注意 | 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの |

絵表示の例

- | | |
|--|--|
|  | ○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。 |
|  | ●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。 |

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

危険



●下記のような医療用電気機器をお使いの方は絶対に使用しない。

- ・ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器
 - ・人工心肺などの生命維持用医療用電子機器
 - ・心電計などの装着型の医療用電子機器
- 医療用電子機器の誤作動をまねく恐れがあります。

警告



●改造はしない。また修理技術者以外の人は、修理をしない。

●廃棄するとき以外は、分解しない。


火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。



●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。
感電・けがの原因となります。

●風呂、シャワー室での使用や水洗い掃除を絶対にしない。

感電・発火・ショートの原因となります。

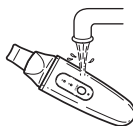

●ACアダプターのコードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない。

感電・発火・ショートの原因となります。



警告



●次のような方は、使用しない。

- ・心臓に障害のある人
 - ・急性疾患の人
 - ・有熱性疾患の人
 - ・血圧異常の人
 - ・感染性疾患の人
 - ・結核性疾患の人
 - ・悪性腫瘍の人
 - ・顔面神経痛の人
 - ・妊娠中の人
 - ・生理中の人
 - ・アトピー性皮膚炎の人
 - ・アレルギー体質の人
 - ・特に肌が敏感な人
 - ・血友病疾患の人
 - ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
 - ・飲酒や薬を服用中の人・過度の日焼け直後で赤くヒリヒリし、炎症を起こしている人
 - ・健康が特にすぐれない人、疲労が激しい人
 - ・化学繊維でかぶれた経験のある人
- 事故やトラブルの恐れがあります。

●下記の部位には、使用しない。

- ・整形手術をした部位
 - ・眼球および上まぶた
 - ・傷口
 - ・顔面黒皮症
 - ・口の中など粘膜の部位
 - ・ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位・感覚、知覚障害を起こしている部位
 - ・皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部位
 - ・カユミやホテリ、物理的刺激による病的なシミのある部位
 - ・過度の日焼けで炎症を起こしている部位
 - ・化粧品などで皮膚炎を起こしている部位
- 事故や肌のトラブルの恐れがあります。

●水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電の原因となります。

●専用のACアダプターで、他の商品を使用したり、充電したりしない。 また、専用のACアダプター以外での使用はしない。

異常発熱による発火・ショートの原因となります。

警告



●ACアダプターのコードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用したりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。コードが破損し、火災・感電の原因となります。

●ACアダプターにコードを巻きつけない。
コードが断線し、火災・感電の原因となります。

●ACアダプターのコードがよじれたままでは使用しない。
ショートして火花が出ることがあります。



●ACアダプターは、浴室や湿気の多いところでは使用しない。保管しない。
感電・発火・ショートの原因となります。



●使用時以外は必ず電源を切る。また、充電時以外はACアダプターをコンセントから抜く。
けがや、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。



●ACアダプターのコードは必ずゆとりを持たせて使用する。
コードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

●ACアダプターは清潔にする。刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る。
火災の原因となります。

●必ずAC100-240Vで使用する。
火災・感電の原因となります。

●使用中痛みや不調を感じたときや、使用後肌に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談する。
事故や体調不良、肌のトラブルなどの原因となります。

⚠ 注意

- 落としたり、ぶつけたりしない。

感電・発火の原因となります。



- 顔のお手入れ以外の目的では使用しない。

事故やトラブルにつながる恐れがあります。

- 乾いた肌への使用は絶対にしない。

肌のトラブルの原因となります。

- スパチュラを肌以外の異物に触れさせない。

事故やトラブルにつながる恐れがあります。

- お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。

ひび割れ、感電、引火の恐れがあります。

- 肌に傷や炎症がある場合は絶対に使用しない。

肌のトラブルや痛みの原因となります。

- 脱毛・剃毛処理した当日は同部位への使用はしない。

腫れたり、赤みが出る恐れがあります。

- 規定時間以上の使用はしない。

肌のトラブルの原因となります。

- ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない。

感電・ショート・発火の原因となります。





注意



- ご使用前に、スパチュラに傷がないか確認する。
肌を傷つける原因となります。

- 使いはじめの方や敏感肌の方は使用時間を短めにして、お肌の様子を見ながら使用する。
事故や肌荒れなどのトラブルの原因となります。

- イヤリングやネックレスなどのアクセサリー、コンタクトレンズは、外して使用する。
事故やトラブルの原因となります。

- ひどい肌荒れや皮フ表面に凹凸がある場合またはうぶ毛やヒゲなどによって、まれに刺激を強く感じる場合があります。
その際には、その部位への使用を控える。
事故やトラブルの原因となります。

- スパチュラは肌の同一部位に留めず移動させて使用する。
肌のトラブルや体調不良の原因となります。



- ACアダプターを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のACアダプターを持って引き抜く。
感電・発火・ショートの原因となります。

海外使用の手引き

- 当商品は「AC100-240V」の地域で使用できます。
 - ご使用前に、使用する国の電源コンセントの形状を確認してください。
- ※世界の電圧とプラグの一覧は、8ページに掲載しています。
- 当商品をAタイプ適用外の国でご使用の際は、使用する国の電源コンセントにあった接続プラグをご用意ください。

Aタイプ	Bタイプ	B3タイプ
商品のプラグ形状 ※そのまま使用できます。 	 	 
BFタイプ	Cタイプ	Oタイプ
 	 	 
O2タイプ	SEタイプ	注) 国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、現地で充分お確かめのうえ、ご使用ください。 また、電圧・プラグの一覧に記載していない国は、プラグアダプターが異なりますので、現地のホテルなどに確かめください。
 	 	

BEFORE USE

- Before using, please check the voltage and type of plug at your location.
(ご使用前に、使用する国の電圧およびプラグの形状を確認してください。)
- Before using, please confirm the shape of the plug socket, and choose the A plug or C plug adaptor.
(ご使用前に、電源コンセントの形状を確認して、接続プラグを選んでください。)
- Before using, be sure to check the voltage and type of plug, because the voltage and the type of plug, may differ according to the area even in the same country.
(国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、ご使用前に、電圧・プラグ形状を充分確認してください。)

世界の電圧とプラグ


地域・国名	Area・Countries	電圧 Voltage	プラグ Plug	地域・国名	Area・Countries	電圧 Voltage	プラグ Plug
アフガニスタン	Afghanistan	230	B, B3, G, SE	フィンランド	Finland	120/230	A, B, C, SE
インドネシア	Indonesia	115/230/240	B, B3, BF, C, SE	フランス	France	127/230	A, C, SE
カンボジア	Cambodia	120/250	A, C	ブルガリア	Bulgaria	110/220	A, C, SE
シンガポール	Singapore	115/230	A, B, B3, BF, C	ベルギー	Belgium	127/230	A, B, C, SE
スリランカ	Sri Lanka	230	B, B3, BF, C	ポーランド	Poland	230	B, B3, C
タイ	Thailand	110/220	A, B, B3, BF, C	ポルトガル	Portugal	230	B, B3, BF, C, SE
台湾	Taiwan	110/220	A, C, O	マルタ	Malta	240	B, B3, BF, C
韓国	Korea	110/220	A, C, SE	マジョルカ島	Majorca Is.	127/220	A, B, C, SE
北朝鮮	PRK	110/200/220	A, B, B3, BF, C, O, SE	モナコ	Monaco	127/220	A, B, C, SE
中国	China, Rep.	110/220	A, B, B3, BF, C, O, 02, SE	ユーゴスラビア	Yugoslavia	220	C, SE
日本	Japan	100	A, B, B3, BF, C, SE	ルーマニア	Romania	220	C, SE
ネパール	Nepal	115/220	A, B, B3, BF, C, SE	ルクセンブルグ	Luxembourg	127/220	A, C, SE
バングラディッシュ	Bangladesh	230	B, B3, C	ボスニア	Bosnia	220	C, SE
バレー	Bali Is.	110/220	A, B, B3, BF, C	クロアチア	Croatia	220	C, SE
パキスタン	Pakistan	110/230	A, B, B3, C	マケドニア	Macedonia	220	C, SE
ミャンマー	Myanmar	230	B, B3, BF, C, SE	モルドバ	Moldova	127/220	A, C, SE
フィリピン	Philippines	120/230/240	A, B, B3, C, O	ラトヴィア	Latvian	127/220	A, C, SE
ブータン	Bhutan	230	C	オーストラリア	Australia	240/250	A, BF, O
ブルネ	Brunei	240	B3, BF	グアム	Guam	120/240	A, BF, O
ベトナム	Vietnam	110/220	A, BF, C, SE	サイパン	Saipan	110	A
香港	Hong Kong	200/220	B, B3, BF, C	ソロモン島	Solomon Is.	240	B, B3, O
マカオ	Macao	115/127/220	A, B, B3, BF, C, SE	タヒチ島	Tahiti Is.	110/220	A, C
マレーシア	Malaysia	240	B, B3, BF, C, SE	トンガ王国	Tonga	240	O
モンゴル	Mongol	230	B, B3, C	ニューカレドニア	New Caledonia	220	B, B3, C, O, SE
ラオス	Laos	220	C, SE	ニューゼaland	New Zealand	230/240	A, C, SE
アメリカ	U.S.A	120	A	パプアニューギニア	Papua New Guinea	240	A, B, C, O
ハワイ	Hawaii	120	A	フィジー	Fiji	120/240	A, B, C, O
カナダ	Canada	120/240	A, BF	アラブ首長国連邦	United Arab Emirates	220/240	B, B3, BF, C
テキサス	Texas	120/240	A, BF	イエメン民主人民共和国	Yemen	230	B3, BF, C
アルゼンチン	Argentina	220	B3, C, O, SE	イスラエル	Israel	230	C, O, SE
ウルグアイ	Uruguay	220	B3, BF, C	イタリ	Italy	220	B, B3, BF, C, SE
エクアドル	Ecuador	115/120/220	A, B3, C, O	イラン	Iran	230	B, B3, C, SE
エル・サルバドル	El Salvador	110/220	A, B3, BF	オマーン	Oman	230	B, B3, BF, C
キューバ	Cuba	110/220	A, BF, C	カタール	Qatar	240	BF
グアテマラ	Guatemala	120/240	A, BF, C, O	キプロス	Cyprus	240	B3, BF, C
コスタ・リカ	Costa Rica	120/240	A, BF, C, O, SE	クウェート	Kuwait	240	B, B3, C, SE
コロンビア	Colombia	120/150	A, B3, C	サウジアラビア	Saudi Arabia	127/220	A, B, B3, BF, C, SE
ジャマイカ	Jamaica	120/240	A, B3, BF, C	シリア	Syria	220	A, B3, BF, C
スリナム	Surinam	127/220	A, C, SE	トルコ	Turkey	220	B, B3, C, SE
チリ	Chile	220	B3, BF, C, SE	バーレーン	Bahrain	110/220/230	A, BF
ドミニカ共和国	Dominican Rep.	110/220	A, BF, C	ヨルダン	Jordan	220	B3, BF
ニカラガ	Nicaragua	120/240	A, BF	レバノン	Lebanon	110/220	A, C
パナマ	Panama	110/220	A, BF, C	エジプト・アラブ共和国	Arab Rep. of Egypt	220	B3, BF, C, SE
バージン諸島	Virgin Is.	120/240	A, BF, C	アルジェリア	Algeria	127/220	A, BF, C
バミューダ	Bermuda	115/120/230	A, BF	アンゴラ	Angola	220	B, B3, C
バハマ	Bahamas	115/120/230	A, BF, C, SE	ウガンダ	Uganda	240	BF, C
パナマ	Panama	120/240	A, BF, C, SE	エチオピア	Ethiopia	220	A, BF, C
パラグアイ	Paraguay	220	A, C, SE	カナリア諸島	Canary Is.	115/120	A, C, SE
ブラジル	Brazil	127/220	A, C, SE	カメルーン	Cameroon	127/220	A, BF, C
エクアドル	Ecuador	120/240	A, BF, C	ガーナ	Ghana	230/250	B3, BF, C
ベネズエラ	Venezuela	120	A, C, SE	ギニア	Guinea	220	BF, C
ペルー	Peru	220	A, C, SE	ケニア	Kenya	240	B3, BF, C
ボリビア	Bolivia	110/220	A, C, SE	コモロス	Komoro Islands	220	B, B3, C
メキシコ	Mexico	120/127/230	A, C, SE	コンゴ	Congo	220	1, C
アイルランド	Ireland	230	A, B, B3, BF, C, SE	ザンビア	Zambia	220	C
アイルランド	Ireland	230	A, B, B3, BF, C, SE	ジンバブウェ	Zimbabwe	220/240	B, B3, BF, C
イギリス	England	230/240	B, B3, BF, C	赤道ギニア	Equatorial Guinea	220	B, BF, C
イタリア	Italy	125/220	A, C, SE	セネガル	Senegal	127/220	A, B3, C, SE
オーストリア	Austria	230	B, C, SE	ソマリア	Somalia	110/220/230	B, B3, BF, C
オランダ	Netherlands	230	B, C, SE	タンザニア	Tanzania	230	BF, C
ギリシャ	Greece	230	B, B3, BF, C	中央アフリカ共和国	Central Africa	220	B, B3, C, SE
グリーンランド	Greenland	230	B, B3, BF, C	チュニジア	Tunisia	127/220	A, B, B3, BF, C, O, SE
ジブラルタル	Gibraltar	230/240	B, B3, BF, C	ナイジェリア	Nigeria	230	B, B3, BF, C
スイス	Switzerland	230	A, B, C, SE	ボツワナ	Botswana	220	B, B3, BF, C
スウェーデン	Sweden	230	A, B, C, SE	マダガスカル	Madagascar	100/220	A, B3, C
スペイン	Spain	127/220	A, C, SE	南アフリカ共和国	South Africa Rep.	220/230/250	B, B3, BF, C, SE
ロシア共和国	Russia	127/220	A, B, C, SE	モーリタニア	Mauritania	220	C, SE
スロベニア共和国	Slovenia Rep./Slovak Rep.	230	A, B, C, SE	モザンビーク	Mozambique	220	A, C, SE
デンマーク	Denmark	230	C	モロッコ	Morocco	115/127/220	A, C, SE
ドイツ	Germany	127/230	A, C, SE	リビア	Libya	127/230	A, B3, C
ノルウェー	Norway	230	C	リビア (アラブ)	Libia Arab	120/240	A, B3, C, SE
スウェーデン	Sweden	230	C	スワジランド	Swaziland	110/220	A, C, SE

※同じ国でも地域によって電圧やプラグの形が定まらず、変となる場合もあります。事前に目的地のホテルや旅行代理店でご確認のうえ、ご使用ください。

各部のなまえ

KBE-2710

本 体

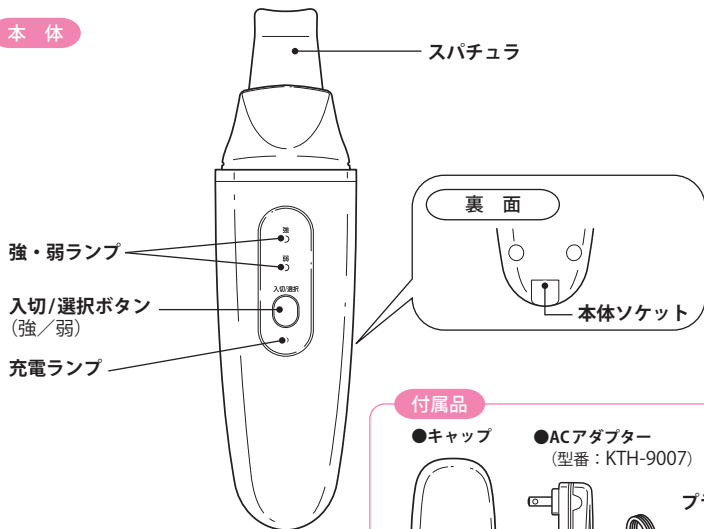


付属品

●キャップ



※梱包時は本体に取り付けられています。

●ACアダプター
(型番: KTH-9007)

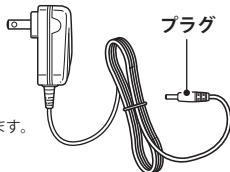

仕様

■本体

電 源	充電式 (専用ACアダプター使用)
使 用 電 池	リチウムイオンポリマー充電電池 DC3.7V
消 費 電 力	2.7W
寸 法	約46 (W) × 28 (D) × 175 (H) mm
質 量	約110g
充 電 時 間	約2時間
超 音 波 数	約23,500Hz
付 属 品	ACアダプター (型番: KTH-9007)、キャップ、取扱説明書 (本書)、保証書

■ACアダプター (型番: KTH-9007)

入 力	AC100-240V 50/60Hz
出 力	DC5.0V 1.0A
コ ー ド 長	約1.8m
プラグ形状	--C+

⚠ ACアダプターのコードの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。

断線し、ショート・発火・けがの原因となります。


●常にACアダプターのコードはゆとりをもった状態で使用する。(図①)

●屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。(図②③)

●ACアダプターのコードによじれをおこさない。(図④)

●本体にACアダプターのコードを巻きつけ、収納しない。(図⑤)

※ACアダプターのコードが異常に熱を持っているときは使用しない。

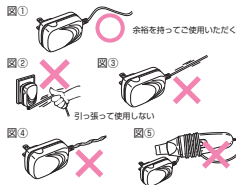



充電のしかた

本機は充電しながらのご使用はできません。
充電完了後、ACアダプターを取り外してご使用ください。

購入後初めて使用する場合や長期間使用しなかった場合は、約2時間充電してください。


1 本体ソケットにプラグを差し込みます。

お願い

- ・充電の際は、必ず電源を切ってください。

2 コンセントにACアダプターを差し込みます。

(充電中は充電ランプが赤色に点灯します。)

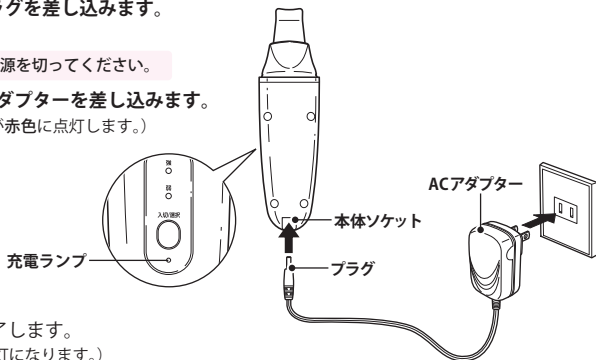

充電の目安

- 約2時間で充電が完了します。
(充電ランプが緑色の点灯になります。)
- 1回のフル充電で約40分使用できます。
- 「弱」ランプが点滅したら、充電してください。

お願い

- ・充電・ご使用中は、本体・ACアダプターが多少熱くなりますが、異常ではありません。
- ・本機専用のACアダプター以外では充電しないでください。

充電終了後

コンセントからACアダプターを抜き、本体ソケットからプラグを取り外します。



ご使用になる前に



警告

使用中痛みや不調を感じたときや、使用後肌に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談する。
事故や体調不良、肌のトラブルなどの原因となります。



注意

肌に傷や炎症がある場合は絶対に使用しない。
肌のトラブルや痛みの原因となります。

イヤリングやピアス、ネックレスなどのアクセサリー、コンタクトレンズは外して使用する。
事故やトラブルの原因となります。

超音波ピーリングについて

※使用頻度・使用時間を必ず守ってください。

※週1～2回、1回に10分以内のケア

1秒間に約2万3500回の微細な振動で、角質・毛穴の汚れを浮かし出し、除去します。
(効果には個人差があります。)

トリートメント前の準備

・洗顔をして、メイク、皮脂、汚れなどを落として、肌を清潔な状態にします。



・身につけているアクセサリー類、貴金属類は外します。





超音波ピーリング (週1～2回・10分以内)

使用頻度

1回の使用時間

自動電源OFF 一約10分

⚠ 注意

乾いた肌への使用は絶対にしないでください。
肌のトラブルの原因となります。

1 肌にお手持ちの化粧水または水を塗布します。

お願い

・必ず肌をぬらしてご使用ください。

2 電源を入れて、振動の「強」「弱」を選択します。

①「入切/選択ボタン」を長押しして、電源を入れます。
(電源を入れると同時に「強」が選択されています。)



②「入切/選択ボタン」を短く押して、「強」または「弱」を選択します。

お願い

・使いはじめや敏感肌の方は「弱」でご使用ください。




3 ケアをはじめます。

スパチュラを肌に軽く押し当て、ゆっくりと動かします。

・すべらす目安は、5秒間に10cmぐらいのスピードです。

お願い

- ・スパチュラは肌の同一部に留めず、移動させてご使用ください。また同一箇所にも何度も使用しないでください。肌のトラブル、体調不良などの原因となります。
- ・スパチュラがすべりにくい場合は、化粧水または水を追加してください。
- ・スパチュラを肌に強く押し当てないでください。肌のトラブルの原因となります。

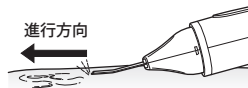

・「超音波ピーリング」は、週1～2回、1回に10分以内です。約10分経過すると、自動的に電源が切れます。

動かしかた



下から上に向けてゆっくり動かします。

● 顎&口元



● フェイスライン・頬・額



● 小鼻周り



使用後

4 「入切/選択ボタン」を長押しして、電源を切ります。

・スパチュラなど、本体についた汚れをやわらかい布やティッシュなどで拭き取ってください。

お願い

- ・連続使用はしないでください。肌に負担がかかり、肌のトラブルの原因となります。






お手入れと保管のしかた

電源が切れていることを確認してください。

本体

本体の汚れは、やわらかい布やティッシュなどで拭き取ります。

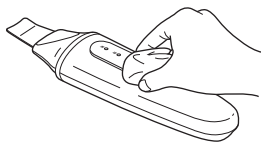

スパチュラ

こびりついた汚れは、水分を含ませて固くしぼった布で拭き取ります。

⚠ 注意

本体の水洗いはできません。

感電・故障の原因となりますので、絶対におやめください。

シンナー・ベンジン・アルコールなどは絶対に使用しないでください。

変質・変色の恐れがあります。

保管のしかた

お客様の手の届かない所、湿気やほこりの少ない所に保管します。

⚠ 注意

浴室などの水のかかる所や、湿気の多い所に放置しないでください。

故障の原因となります。

直射日光の当たるところ、熱器具の近くに放置しないでください。

変形・変色・故障の原因となります。



故障かなと思ったら

以下の点をお調べください。

症 状	チェックポイント	処置のしかた
「弱」ランプが点滅する、または「強」「弱」ランプが点灯しない。	充電されていますか？	約2時間充電してください。 (P. 11 参照)
スパチュラが振動しない。		
充電できない。	プラグが本体ソケットから抜けていませんか？	プラグを本体ソケットに確実に差し込んでください。
	ACアダプターがコンセントから抜けていませんか？	ACアダプターをコンセントに確実に差し込んでください。

★長年ご使用の超音波ピーリングの点検を！

愛情点検



ご使用の際
このような
ことはありませんか？

- 電源を入れても、ときどき運転しない時がある。
- ACアダプターのコードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音がある。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用
中 止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて必ず販売店にご相談ください。



Q&A よくある質問

お客様からよく寄せられるご質問を掲載しております。

Q 顔以外（体など）にも使っても良いですか？

A 顔専用です。顔以外には使用しないでください。

Q 1日に何度使っても大丈夫ですか？

A 以下の使用頻度・使用時間を守ってご使用ください。
・週1～2回（1回に10分以内 ※ただし、同一箇所に何度も使用しないこと。）

Q 肌に「ピリピリ感」を感じるのですが…

A お手持ちの化粧水または水を追加してご使用ください。
それでも肌に違和感を感じる場合は、直ちにご使用を中止し、専門医にご相談ください。
そのままご使用を続けますと、事故や体調不良、肌トラブルの原因となります。

Q 「強」「弱」の切り換えはどう決めたらいいのですか？

A 使いはじめは「弱」にして、使用時間を短くしてください。
また、敏感肌の方は「弱」でご使用ください。

Q 必ず化粧水か水をつけなければならないのですか？

A 化粧水や水は、超音波を肌にスムーズに伝えるためのものです。
乾いた肌に使用されますと、肌に大きな負担がかかってしまいますので、お手持ちの化粧水または水のご使用をおすすめします。

製品を廃棄するとき

⚠ 注意

- ・お客様による充電電池の修理、交換はできません。
- ・廃棄するとき以外は、製品を分解しないでください。

充電電池リサイクルにご協力を



Li-ion


このマークの商品には、充電電池を使用しております。充電電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済の商品の廃棄に際しては、充電電池を取り出し、必ずプラスとマイナスの金属端子部にテープ等を貼って、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。

詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。

<http://www.jbrc.com>

廃棄する際の充電電池の取り出し方

電源を「ON」にして、完全に動作しなくなるまで充電電池を放電させてからおこなってください。
ドライバーを使い、①～⑦の手順で分解してください。

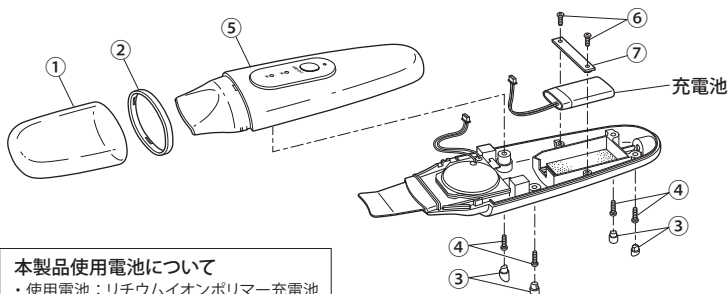

本製品使用電池について

- ・使用電池：リチウムイオンポリマー充電電池
- ・公称電圧：DC3.7V
- ・数量：1個

アフターサービスについて

1. 保証書

- 保証書は別途添付されています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- 超音波ピーリングの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、保証書に記載の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。

尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06 (6262) 3561 FAX.06 (6268) 1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL.048 (718) 3340 FAX.048 (718) 3350

西日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL.06 (6613) 3145 FAX.06 (6613) 3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL.06 (6613) 3211 FAX.06 (6613) 3299

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

TEL.06 (6262) 3561 FAX.06 (6268) 1432

受付時間：平日9：00～17：30
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2016年8月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)