

# KOIZUMI


家庭用

## 角質ケア KLC-0350

### 取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

保証書付

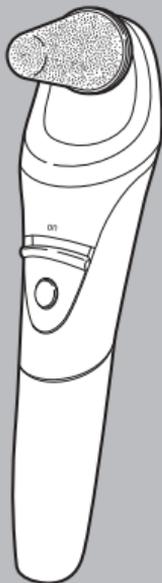

このたびはコイズミ 角質ケアをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

小泉成器株式会社

# 安全上のご注意

- \*ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- \*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



**警告**

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



**注意**

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

## 絵表示例と絵表示の意味



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

## ⚠ 警告



**改造はしない。修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。**  
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。



**使用中、万一肌にトラブルが生じた場合は使用を中止する。**  
肌のトラブルはストレスや体質や内臓疾患なども原因として考えられますので、専門医にご相談ください。

**次のような方は、医師と相談のうえ使用する。**

- 足に血行障害のある人
  - 足の皮膚に腫れ・痛み・熱を持っている人
  - 糖尿病の人
- 事故や体調不良、肌のトラブルなどの原因となります。



**次のような方は、使用しない。**

- アレルギー体質の人
  - 特に肌が敏感な人
  - 皮膚病の人、アトピー性皮膚炎の人
  - 皮膚炎や過度の日焼けなど、皮膚に異常のある人
  - 皮膚感覚の弱い人
  - 足に神経障害、皮膚知覚障害のある人
  - 薬（睡眠薬・かぜ薬・抗凝固剤など血液が固まりにくくなる成分を含んだ薬など）を服用された人
  - 体調が特にすぐれない人、疲労が激しい人
  - 飲酒をされた人
- 事故や体調不良、肌のトラブルなどの原因となります。

**子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。**  
けがをする恐れがあります。

## ⚠ 注意

傷・湿疹・ほくろ・あざ・いぼ・吹出物がある部位には使用しない。  
肌を傷つける原因となります。

アタッチメントを取り外した状態で電源を入れない。  
事故やけがの恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。  
故障の原因となります。

足裏や足指・かかとのお手入れ以外の使用、乳幼児・ペットへの  
使用は避ける。  
けがや故障の原因となります。



電源を入れたまま放置しない。  
事故・トラブルの原因となります。

肌に強く押し付けたり、同じところに2～3秒以上あて続けたり、  
連続で使用しない。  
肌のトラブルの原因となります。

故意に力を加えて無理に運転を止めない。  
けが・故障の原因となります。

家族や他人と共用しない。  
感染症を広げる恐れがあります。



本体に水をかけたり、水につけたりしない。  
また、ぬれた手で使用しない。  
ショート・感電の原因となります。

## ⚠ 注意

**必ず肌が乾いた状態で使用する。**

肌を傷つける原因となります。

**ご使用前に必ずアタッチメントの状態（変形・破損・取り付け状態など）を確認する。**

肌を傷つける原因となります。

**使いはじめや敏感肌の方は、肌の様子を見ながら使用する。**

肌のトラブルの原因となります。

**アタッチメントはこまめにお手入れをする。**

肌のトラブルの原因となります。

**乾電池の取り扱いに関して、以下のことを守る。**

- アルカリ乾電池（単4形）以外は使用しない。
- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- 乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐ取り出し、分別廃棄する。
- 長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する。
- 新しい乾電池と古い乾電池または異なった種類の乾電池を混ぜて使用しない。
- 火の中に捨てない。

乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。

**浴室や湿気の多い所に保管しない。**

故障の原因となります。



# 各部のなまえ

## KLC-0350

### 本体

#### 付属品

アタッチメント(粗目)

<色:紫>

※梱包時は本体に取り付けられています。

ロック付スイッチ

ロックボタン

乾電池カバー

#### 付属品

アタッチメント(細目)

<色:白>

ヘッドカバー

掃除用ブラシ



※梱包時はアタッチメント(細目)に取り付けられています。

## 仕様

電源	DC3V 単4形アルカリ乾電池2本(別売)
本体寸法	約43(W)×80(D)×180(H) mm
質量	約130g(アタッチメント(粗目)・ヘッドカバー装着時、乾電池含まず)
付属品	アタッチメント(粗目)、アタッチメント(細目)、ヘッドカバー、掃除用ブラシ、取扱説明書(本書:保証書付)



# 【アフターサービスについて】

## 1 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 2 修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

## 3 補修用性能部品の保有期間

- 角質ケアの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

## お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。

尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

## 【保証・無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3. **ご購入、ご購入品等**で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
  - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
  - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
  - (ホ) 本書のご提示がない場合。
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

### 修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

# 角質ケア 保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。  
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買  
上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	KLC-0350		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理 保証期間	対象部分 本体	期間（お買 上げ日より） 1年	
お客様	お名前	<b>見 本</b>	
	ご住所		
TEL			
販売店	店名・住所・電話		

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。  
小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561

## お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

### ご意見・ご質問について

#### お客様相談窓口



ナビダイヤル  
(全国共通番号)

0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけません

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561 FAX.06(6268)1432

### 修理に関するお問い合わせ

#### 東日本修理センター



ナビダイヤル  
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけません

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL.048(718)3340 FAX.048(718)3350

#### 西日本修理センター



ナビダイヤル  
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけません

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL.06(6613)3145 FAX.06(6613)3196

### 部品に関するお問い合わせ

#### 部品センター



ナビダイヤル  
(全国共通番号)

0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけません

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL.06(6613)3211 FAX.06(6613)3299

## 小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号  
TEL.06(6262)3561 FAX.06(6268)1432

受付時間：平日9:00~17:30  
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2018年9月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その際はご容赦願います。)

# アタッチメントの着脱のしかた

- 肌の状態に合わせてアタッチメントを選び、使い分けてください。


※梱包時は粗目<色：紫>が取り付けられています。

- ・粗目<色：紫>=厚く固くなった角質のお手入れに。
- ・細目<色：白>=仕上げや細かい部分のお手入れに。

- 必ずロック付スイッチを下にスライドして電源を切ってから行ってください。


## ※取り外しかた

アタッチメントを強めに握り、まっすぐに引き抜きます。

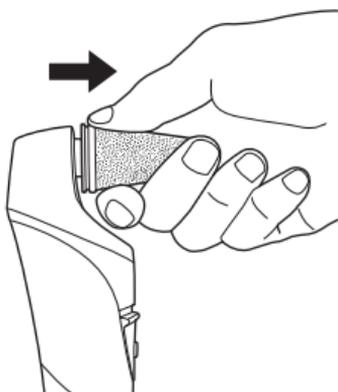

### 悪い例


アタッチメントの先端を握らない

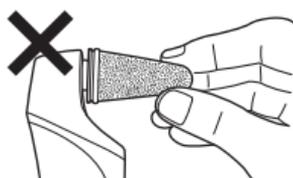

## ※取り付けかた

アタッチメントの中央の穴を、アタッチメント取付部に合わせ、まっすぐに差し込みます。


・「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

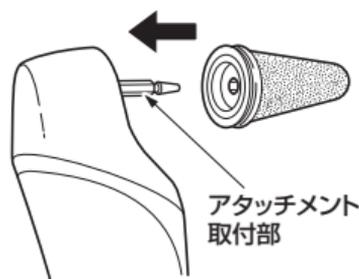


# ヘッドカバーの着脱のしかた

- アタッチメントからヘッドカバーを取り外すときは、アタッチメントごと本体に取り付けてから引き抜くと、取り外しやすくなります。
- 必ずロック付スイッチを下にスライドして電源を切ってから行ってください。

①アタッチメントごと本体に取り付ける

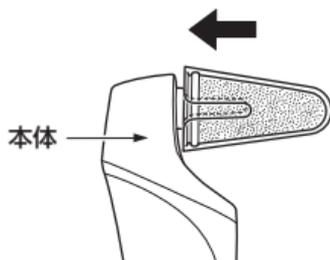

②引き抜く

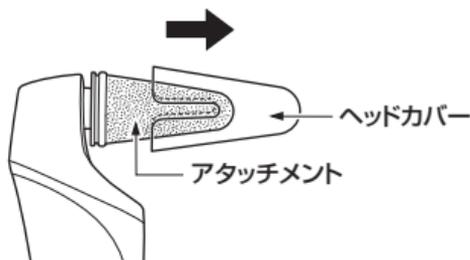

# 消耗部品について

- アタッチメントは消耗部品です。消耗部品を依頼される場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

名称	品番
アタッチメント ・(粗目)<色:紫> ・(細目)<色:白> } 各1個入	KLC-A009

※アタッチメントが破損した場合や、効果が弱くなったと感じられたら交換時期となります。

# 正しい使いかた

## ⚠ 注意

- 本機は足の角質を除去するためのものです。体の他の部位には絶対に使用しないでください。
  - 必ず肌が乾いた状態で使用してください。
  - ご使用前に必ずアタッチメントの状態（変形・破損など）を確認してください。
  - 傷・湿疹・ほくろ・あざ・いぼ・吹出物がある部位には使用しないでください。
- 肌を傷つける原因となります。

## 準備

- ・肌を清潔な状態にし、完全に乾かします。
- ・削った角質が飛び散ることがあるため、紙などを敷きます。

**1** 肌の状態に合わせてアタッチメントを選び、本体に取り付けます。(P. 11 参照)

**2** ロックボタンを押しながら  
ロック付スイッチを上スライドし、  
電源を入れます。



**3** アタッチメントを軽く肌にあて、  
あてる箇所を少しずつ変えながら  
動かします。

## ⚠ 注意

- アタッチメントを肌に強く押し付けしないでください。
- 同じ箇所にも2～3秒以上あて続けたり、連続で使用しないでください。
- 肌がヒリヒリしたり熱くなったら、直ちに使用を中止してください。

## 使用後

ロック付スイッチを下にスライドし、電源を切ります。

# 上手な使いかた

## ＊ 使用時間の目安

2週間に1回程度、1回に約10分以内のご使用をおすすめします。

## ＊ 上手な動かしかた ※必ず肌が乾いた状態でご使用ください。

### ＊ 足裏



### ＊ 足指



### ＊ かかと



Point

1 粗目<色：紫>のアタッチメントで厚くなった角質を削ったあと、  
細目<色：白>で削ると、よりキレイに仕上がります。

Point

2 足指など細かい部分は、アタッチメントの先端をあてます。

Point

3 お手入れの後は保湿クリームなどを塗り、肌の乾燥を防いでください。

# お手入れと保管のしかた

●必ずロック付スイッチを下にスライドして電源を切ってから行ってください。

## ＊お手入れ


### 本体

本体の汚れは、乾いた布で拭き取ってください。

### ⚠ 注意

本体の水洗いはできません。

感電・故障の原因となりますので、絶対におやめください。

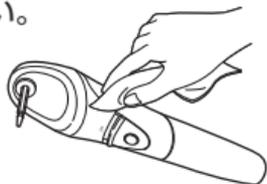

### アタッチメント

＊ご使用のたびにお手入れされることをおすすめします。

- ①アタッチメントを本体から取り外します。(P. 10参照)
- ②付属の掃除用ブラシで角質のクズを取り除きます。
- ③水またはぬるま湯(40℃以下)で洗浄します。



- ④乾いたやわらかい布で水気を拭き取り、乾燥させてから、本体に確実に取り付けます。

### ⚠ 注意

- アタッチメントを本体に取り付けたまま洗わないでください。
- 熱湯は使用しないでください。
- ベンジン・シンナーは絶対に使用しないでください。

## ＊保管

- ヘッドカバーを取り付けて保管してください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 浴室等、湿気の多いところや、直射日光の当たるところは避けてください。

# 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に以下の点をお調べください。

こんな場合	点 検	処置のしかた
ロック付スイッチを入れても動かない。	乾電池は正しい方向で入っていますか？	乾電池の＋－を確かめてください。(P. 6 参照)
	乾電池が消耗していませんか？	新しい乾電池と交換してください。
削りにくくなった。	角質のクズなどがたまっていませんか？	アタッチメントのお手入れをしてください。(P. 14 参照)
	アタッチメントが消耗していませんか？	新しいアタッチメントに交換してください。(P. 11 参照)

## ★長年ご使用の角質ケアの点検を！

### 愛情点検



ご使用の際このようなことはありませんか？

- スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
- 運転中に異常な音がする。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中 止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源を切り、必ず販売店にご相談ください。